



Ropox Support Vask Electric

Brugermanual

Montagevejledning

Denne vejledning skal altid ledsage produktet

Indholdsfortegnelse

1.	SYMBOLFORKLARING	3
2.	SIKKERHED	3
2.1	PRODUKT MÆRKNING.....	5
3.	GENERELLE KRAV	6
3.1	PRODUKT INFORMATION.....	6
3.2	PRODUKT BESKRIVELSE	6
3.3	ANVENDELSESFORMÅL.....	6
3.4	EGNET OPERATØR	7
3.5	VÆSENTLIG YDEEVNE	7
3.6	IKKE KLINISKE FUNKTIONER	7
3.7	KLINISKE FUNKTIONER	7
3.8	PRODUKT DIMENSIONER.....	7
3.9	BETJENING.....	8
4.	MONTAGEVEJLEDNING	9
4.1	INSTALLATIONSINFORMATION	9
4.1.1	<i>Placering af vand-, afløb- og elinstallationer</i>	<i>10</i>
4.2	TILSLUTNINGSADAPTERE.....	11
4.3	KOMPONENTLISTE	12
4.4	INSTALLATION AF PRODUKTET.....	14
4.4.1	<i>Support Vask Electric venstrevendt</i>	<i>14</i>
4.4.2	<i>Support Vask Electric højrevendt</i>	<i>28</i>
5.	FUNKTIONSAFPRØVNING	41
6.	SIKKER ANVENDELSE	41
7.	PLACERING AF BETJENING	42
8.	RENGØRING	43
8.1	FORHÅNDSGODKENDTE DESINFEKTIONSMIDLER	43
9.	VEDLIGEHOLD.....	44
9.1	VEDLIGEHOLDELSE	44
9.2	SERVICESKEMA, DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE.....	45
10.	FEJLSØGNING.....	46
11.	RESERVEDELE.....	46
12.	MILJØHENSYN.....	47
13.	ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET	47
13.1	EGNEDE OMGIVELSER	47
13.2	TILSTØDENDE OG STABLET BRUG	47
13.3	KABLER.....	47
13.4	RF MOBILT UDSTYR.....	47
14.	REKLAMATION	48



Det er vigtigt at læse denne manual
inden montering og ibrugtagning

1. Symbolforklaring

Advarsel! Indikation af potentielt farlig situation. Hvis ikke undgået kan det resultere i alvorlig legemsbeskadigelse eller død.	
Forsigtig! Indikation af potential farlig situation som kan resultere i mindre eller moderat legemsbeskadigelse. Symbolet bruges også til at advare om ikke korrekt anvendelse.	
Vigtigt! Dette symbol gør opmærksom på korrekt brug og håndtering af produktet.	

2. Sikkerhed

	Denne manual skal læses og forstås inden brug og installation. Opbevar altid denne manual i nærheden af produktet. Brugen, installation og service af dette produkt skal udføres i overensstemmelse med denne manual for at undgå farlige situationer som kan føre til personskade. Brug aldrig produktet på anden måde end anvist i denne manual. En hver afvigelse herfra kan resultere i personskade, farlige situationer og/eller gøre skade på produktet. Personen der installerer og anvender dette produkt enten som operatør eller patient skal have adgang til nødvendig sikkerhedsinformation i denne manual. Hvis forsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af fabrikanten, dets serviceagent eller lignende kvalificerede for at undgå fare.
---	--



Udfør ikke reparationer, demontering, egne tilføjelser, justeringer eller ændring af produktet ud over det, der beskrives i denne vejledning. Disse skal udføres af Ropox autoriseret personale. Udfør ikke service, når produktet er i brug.

Dette apparat bruges af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller kognitive evner, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion om brug af apparatet på en sikker måde og forstår farerne involveret.

Børn må ikke lege med apparatet.

Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden tilsyn.

Brug ikke produktet, hvis det har fejl eller er blevet beskadiget, førend det reparereres eller udskiftes.

Hvis kontrolboksen laver usædvanlig støj eller lugter, skal du straks afbryde strømmen.

Pas på, at kablerne ikke er beskadiget.

Produkterne må kun bruges i et miljø, der svarer til deres IP-beskyttelse.




Oplysningerne i denne vejledning er baseret på korrekt installation i overensstemmelse med installationsvejledningen

Ropox kan ikke holdes ansvarlig, hvis produktet anvendes på en måde, der adskiller sig fra angivet i denne vejledning og / eller installationsvejledning.

Ropox forbeholder sig ret til at ændre denne manual og referencedokumenter uden forudgående varsel.

2.1 Produkt mærkning

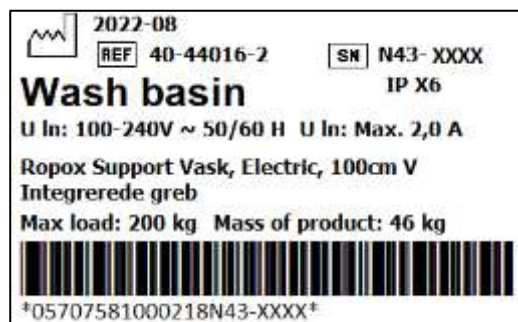

	Dette produkt er CE-mærket i overensstemmelse med: Den europæiske forordning om medicinsk udstyr (EU)2017/745 Rådets direktiv 2006/42/EF om maskiner Rådets direktiv 2011/65/EU, RoHS
	Producentens navn og adresse
	Produktionsdato
	Varenummer
	Serie nummer
	Driftsinterval for elektrisk betjent udstyr. Brugen af elektrisk højdejusterbart udstyr kan køre på maksimalt 2 minutter efterfulgt af en 18 minutters pause.
	Type BF anvendt del. Produktet overholder kravene i IEC 60601-1 for at beskytte mod elektrisk stød.
	Se manualen for vigtige sikkerhedsrelaterede oplysninger, advarsler og sikkerhedsforanstaltninger.
	Klasse 2, dobbelt isolerede elektriske komponenter
	Må ikke bortskaffes som usorteret kommunalt affald. Produktet skal returneres til en egnet genbrugsstation.
	Drift og opbevaringstemperatur må ikke overstige 5-40°C°
	Læs manual før brug

3. Generelle krav

3.1 Produkt information

Producent	Ropox A/S Ringstedgade 221, DK-4700 Naestved +45 55 75 05 00 Email: Info@ropox.com		
Varianter	Varenummer	Model	Konfiguration
	40-44016 40-44017	SupportLine SupportLine	Elektrisk Elektrisk
Forventet levetid	5 år		
MDR Class 2017/745	Class I		
Anvendt del klassifikation 60601-1	Type BF anvendt del		
MEE Class 60601-1	Class II		
Højdejustering	71-96cm		
Max brugervægt iht ISO 17966:2016	520kg		
Strømforsyning	230V ~50/60Hz		
I	Max 2.5A		
Intermittens	2min brug / 18min pause		
IP-klassifikation	IPX6		
Anvendelsestemperatur	-10 °C til +50 °C Transport og opbevaring +5 °C til +40 °C Drift		
Luftfugtighed	20-85% (ikke kondenserende)		
Tiltænkt miljø	Dette produkt må kun bruges i: Professionel sundhedspleje Private hjem Enheden er ikke beregnet til brug i særlige miljøer, som defineret i IEC 60601-1-2		
Materialer i kontakt med patient	Vask Stel Blandingsbatteri	Kunststof/marmor komposit Svejst stålør St. 37, aluminium Krom	
Tilbehør	40-40935 40-44026 40-44040 40-44023 40-44024	Overløbsprop Fast betjening Blandingsbatteri Dækkapper venstre Dækkapper højre	

3.2 Produkt beskrivelse

SupportLine håndvask er en handicapvenlig og robust vask, som kan indstilles efter individuelle behov. Vasken er særligt egnet til gangbesværede. Den er udviklet til at fungere som en stabil og sikker støtte for at undgå faldskader.

3.3 Anvendelsesformål

Den ergonomiske SupportLine håndvask er særligt egnet til gangbesværede og mennesker med reduceret mobilitet, fordi de kan bruge de integrerede, ergonomiske håndtag som hjælp, når de skal rejse eller sætte sig. SupportLine håndvask fås med fast højde eller i en højdeindstillelig variant. I de højdeindstillelige varianter kan man vælge mellem indstillelige spændegreb, manuel eller elektrisk højdejustering. Fælles for de højdejusterbare modeller er, at højden kan indstilles efter brugerens fysiske formåen.

3.4 Egnet operatør

Den tilsigtede operatør kan omfatte alle, der har læst og forstået denne vejledning. Dog er børn undtaget.

3.5 Væsentlig ydeevne

Produktet har ikke væsentlig ydeevne, da patient og bruger ikke oplever nogen risiko i tilfælde af tab af produktets funktion/ydelse.

3.6 Ikke kliniske funktioner


Højdejustering giver bedre ergonomi for bruger.

3.7 Kliniske funktioner

Dette produkt tilbyder ikke en klinisk dokumenteret fordel for patienter, når det anvendes som producenten har til hensigt.

3.8 Produkt dimensioner

40-44016 (Venstrevendt)

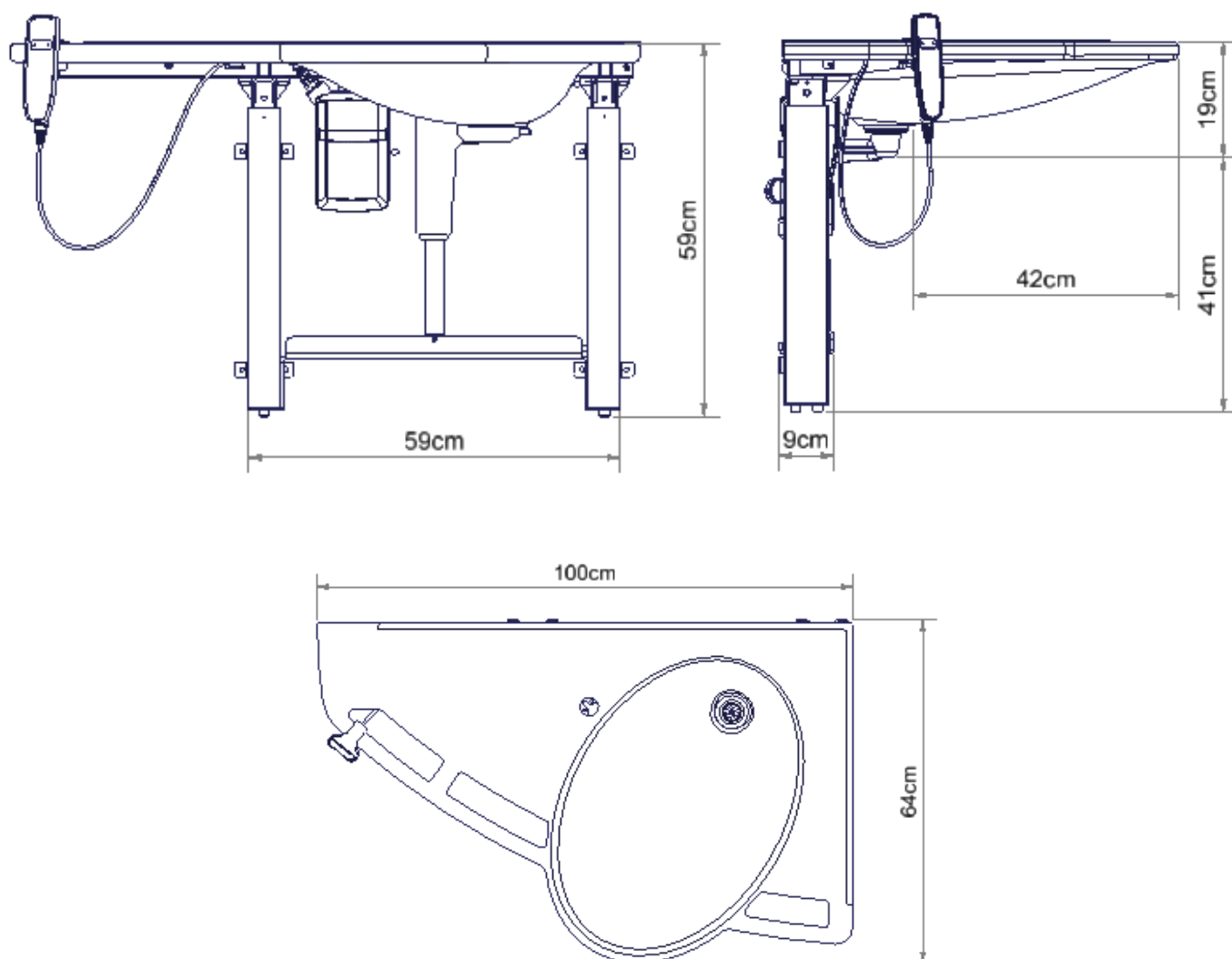

3.9 Betjening

Vasken hæves ved at trykke på symbolet for op og sænkes ved at trykke på symbolet for ned. Vasken stopper så snart knappen slippes.

Højdejustering med håndbetjening med spiralkabel (Standard)



Fast betjening (Tilkøb)



Advarsel!

Produktet skal altid placeres således at det kan bevæge sig frit i hele anvendelsesområdet uden at kolliderer med genstande. Afvigelse herfra kan medføre at produktets stabilitet bortfalder.

Der skal udvises særlig opmærksomhed for at sikre, at ingen børn eller voksne opholder sig under produktet, da der kan opstå alvorlig klemningsfare.

4. Montagevejledning

4.1 Installationsinformation

Konstruktion

Væggen skal være af skruefast materiale godkendt til vådrum.

Belastningstestet i henhold til DS/ISO 17966 er den maksimale brugervægt fastsat til 520kg.

Max belastning i øverste skruer: 71kg/skrue

Minimumsområde for forstærkning i væg er de skraverede områder.

El

Anbefalet placering af el udtag i væg for optimal og skjult ledningsføring.

Hvis alternativ placering ønskes er ledning fra styring 3,2m.

VVS

Afløb er Ø32 og afsluttes med en Ø32x88,5° afløbsbøjning.


Afløbstilslutning og bøjning må maksimalt stikke 90mm ud fra væggen pga. inddækningskapperne.

Vandtilførslen afsluttes med 2 stk. 90° vinklet stopventiler med 1/2" udvendig gevind. Placering og optimal orientering er som vist.


Stopventilerne må maksimalt stikke 90mm ud fra væggen pga. inddækningskapperne.

Det anbefales, at vandtilslutninger og afløbsinstallationer placeres som vist. Det er vigtigt, at alle slanger til vandtilslutning og afløb er fleksible, så stellet frit og uhindret kan justeres indenfor højdeindstillingsintervallet 71-96 cm (inklusive vask).

Afløb kan også placeres i gulv, men i så fald kan dækkapperne ikke anvendes.

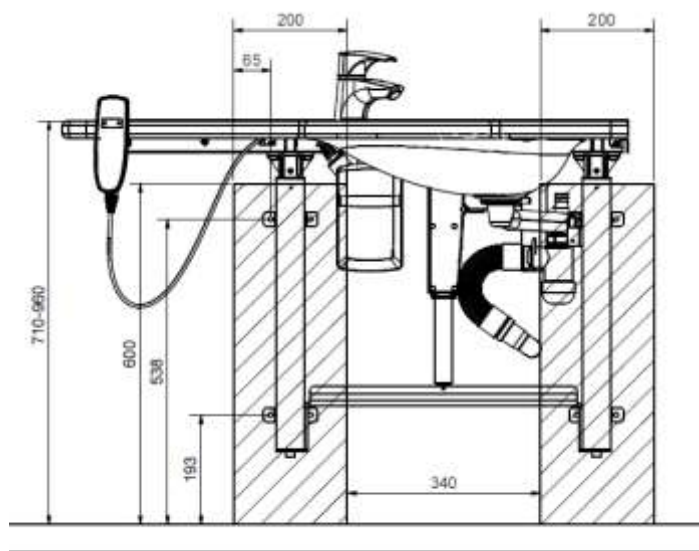

Venstre

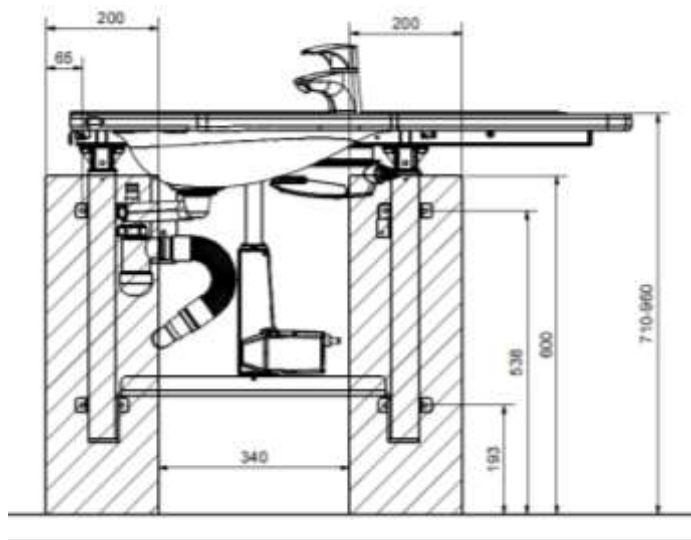


Højre

4.1.1 Placering af vand-, afløb- og elinstallationer

 = El  = Vandtilførsel  = Afløb


40-44016

OBS: Stopventiler vender nedad.

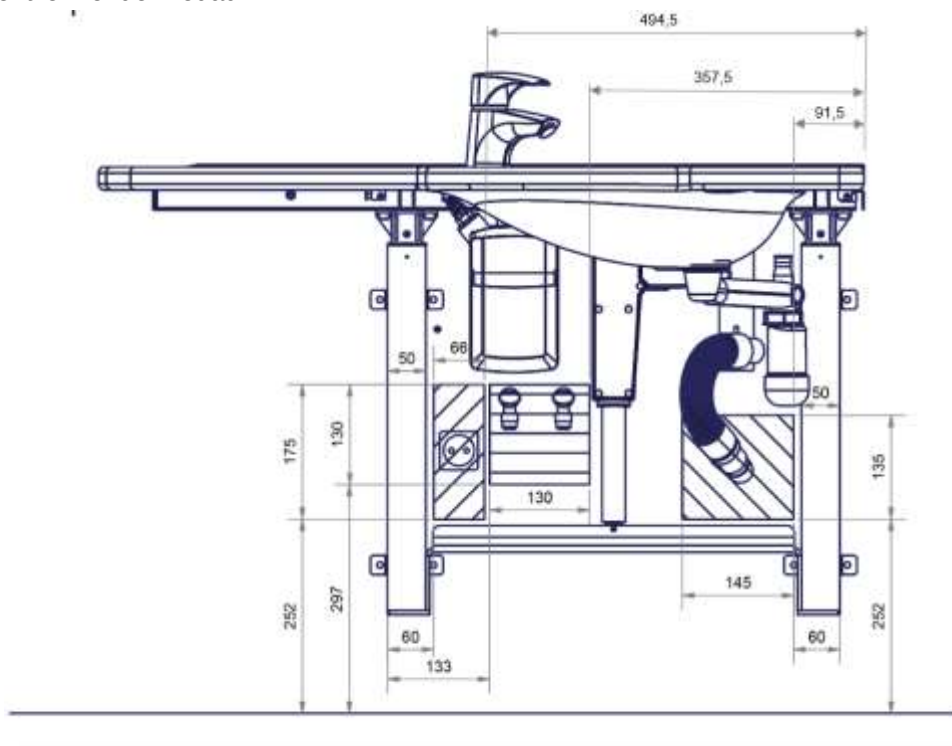

40-44017

OBS: Stopventiler vender opad.

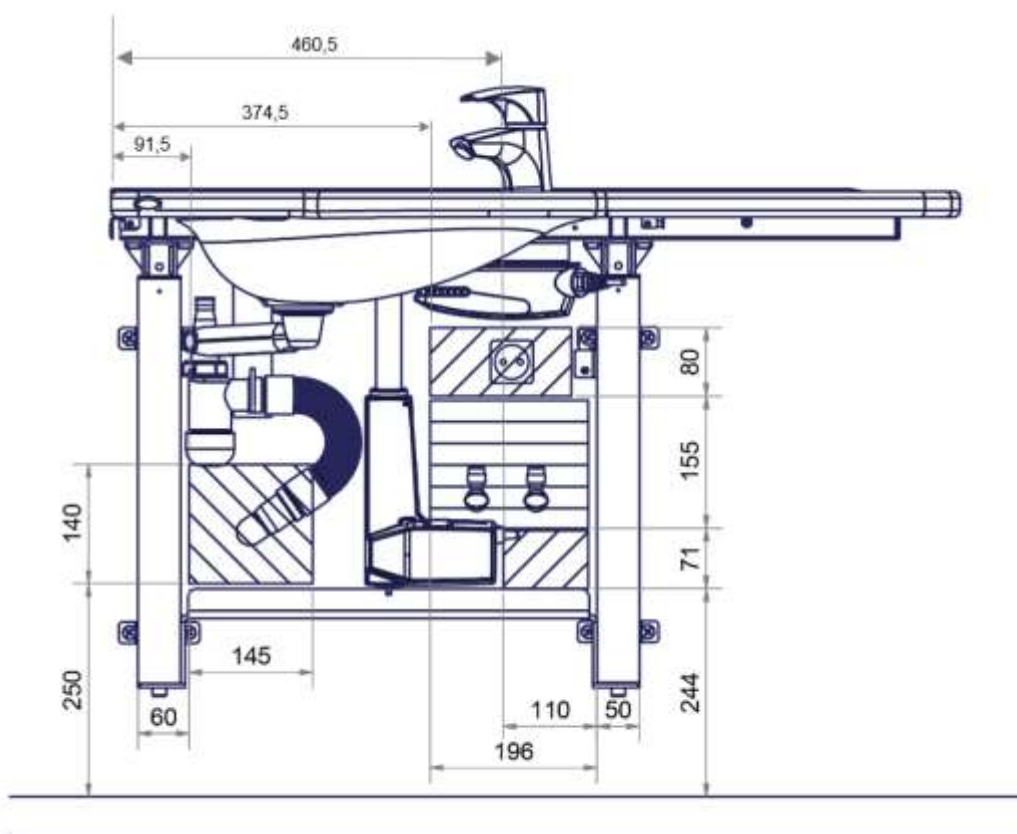

4.2 Tilslutningsadapters

Nedenstående markerede komponenter kan tilkøbes afhængig af installationstype i bygning.

Vandtilslutningsadapters

Slanger fra håndvask	Adapter	Installation i rum (medfølger ikke)
 1/2"	Ingen adapter nødvendig	 1/2" Gevind
	 1/2" -> 3/8" V.nr. 97001670	 3/8" Gevind
	 1/2" -> 15mm V.nr. 97001666	 15mm Rør

Slangeforlængere

Slange fra håndvask	Koblingsstykke	Ekstra slange
	 1/2" -> 1/2" V.nr. 97001662	 1/2" x 1/2", 0,5m, stål V.nr. 97001123
		 1/2" x 1/2", 1m, plast V.nr. 97001120

Afløbsadapters

Afløb fra vask	Adapter	Installation i rum (medfølger ikke)
 Ø32	Ingen adapter nødvendig	 Ø32
	 Ø32 -> Ø40 V.nr. 97001660	 Ø40
	 Ø32 -> Ø50 V.nr. 97001661	 Ø50

Afløbsforlængere

Afløbsslange fra håndvask	Samlingsmuffe	Ekstra afløbsslange
 Ø32	 Ø32-Ø32 V.nr. 97001662	 Ø32 Flexslange, 40-110cm V.nr. 97001161
		 Ø32 Flexslange, 27-62cm V.nr. 97001162

4.3 Komponentliste

Ropox Support Vask, Electric, venstre, 40-44016

40*44010-064: Topplade m. vask, venstrevendt 1 stk.



Påmonteret: Topramme venstrevendt 1 stk.



Ropox Support Vask, Electric, højre, 40-44017

40*44010-070: Topplade m. vask, højrevendt 1 stk.



Påmonteret: Topramme højrevendt 1 stk.



Fælles komponenter

30-67636: Flexi ben, uden spindler 2 sæt.



40*44016-003: Motor beslag 1 stk.



40*44016-023: Aflastningsplade vandlås 1 stk.



40*44016-012: Bund beslag 1 stk.



97000483 Motor 1 stk.



40*44016-204 Styringsbeslag 1 stk.



97001691: Kontrolboks CA30 1 stk.



40*44016-024:	Aflastningsbøjle vandlås	1 stk.	
40*44010-094:	Stilleben M10 for ben	2 stk.	
97001655:	Håndbetjening	1 stk.	
97001738:	Motorkabel L=1000mm	1 stk.	
97000429:	Blindpropper	3 stk.	
97000427:	Netkabel til kontrolboks	1 stk.	
97001601:	Vandlås	1 stk.	
97001125:	Tilslutningsslange, 1/2"x1/2", 0,5m	2 stk.	
97001012:	Brystnippel 1/2" til 3/8"	2 stk.	
97001035:	32x88,5° hvid PP-bøjning	2 stk.	
97001162:	Fleks. afløbsslange ø32/32 studs	1 stk.	

4.4 Installation af produktet



Advarsel!

Før brug sørg da altid for, at ledningskabel og håndkontrollkabel frit kan bevæge sig uden risiko for at klemme eller afbryde produktet som følge af bevægelsen.



Forsigtig!

Ved tilslutning til elnettet skal produktet placeres hensigtsmæssigt ift. stikkontakten, så operatøren vil kunne frakoble produktet i tilfælde af nødsituation.

Montering skal altid udføres af kompetent personale

Inden montagen påbegyndes, kontrolleres ud fra komponentlisten, om alle delene medfølger.



4.4.1 Support Vask Electric venstrevendt



40-44016


Bemærk



Sørg for at vasken er placeret på et ridsefrit underlag så længe vasken vender nedad





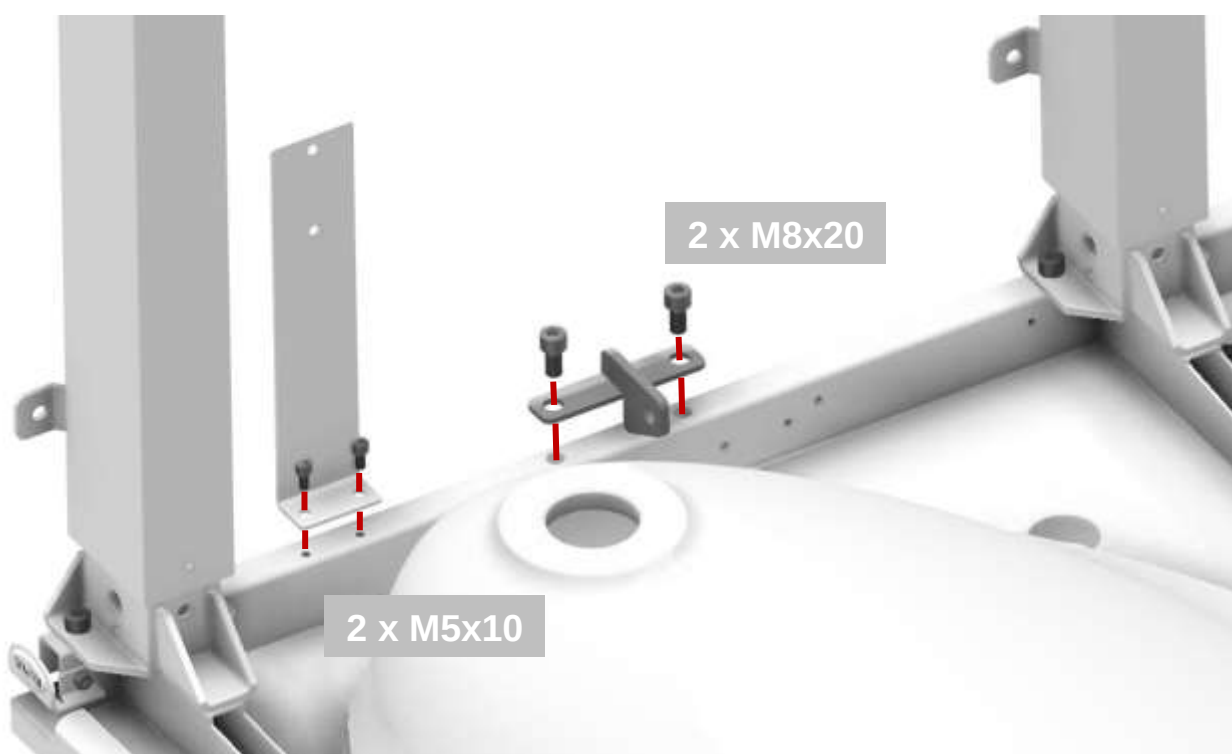
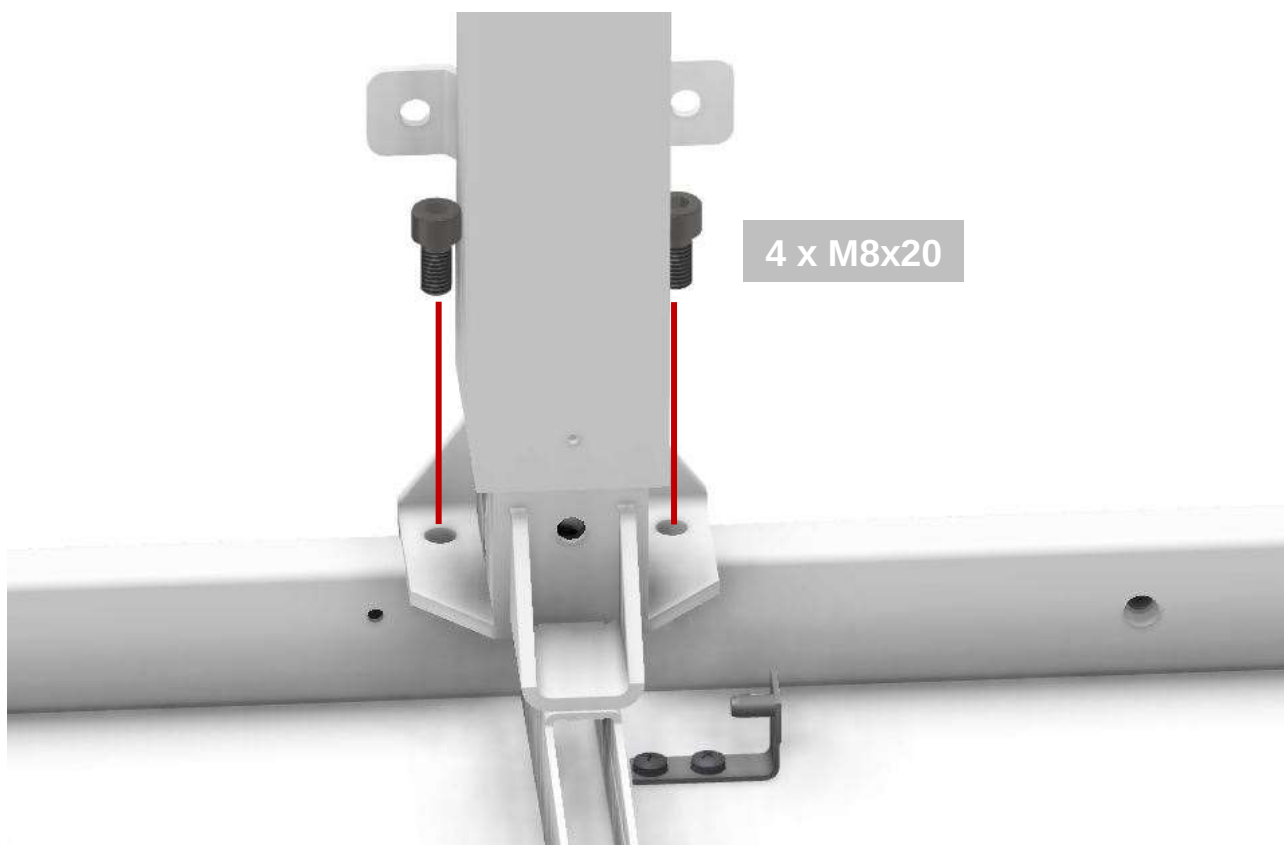


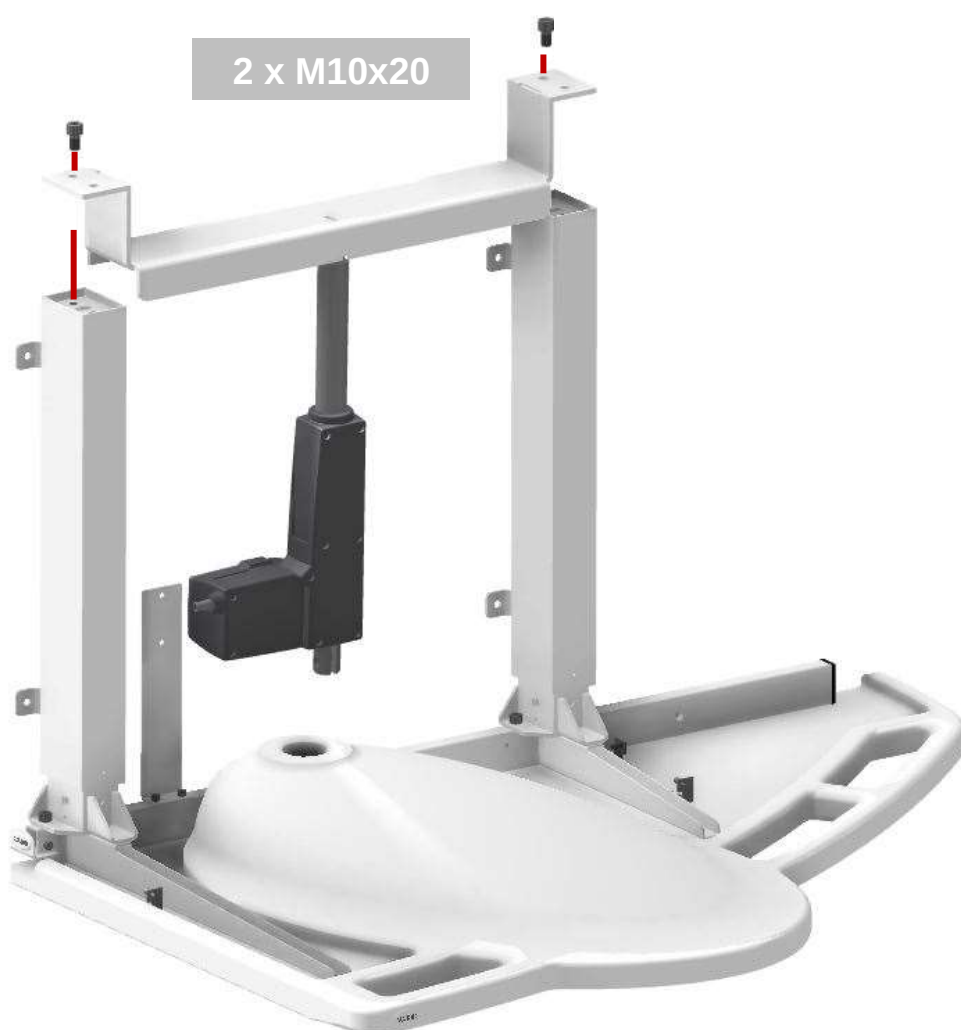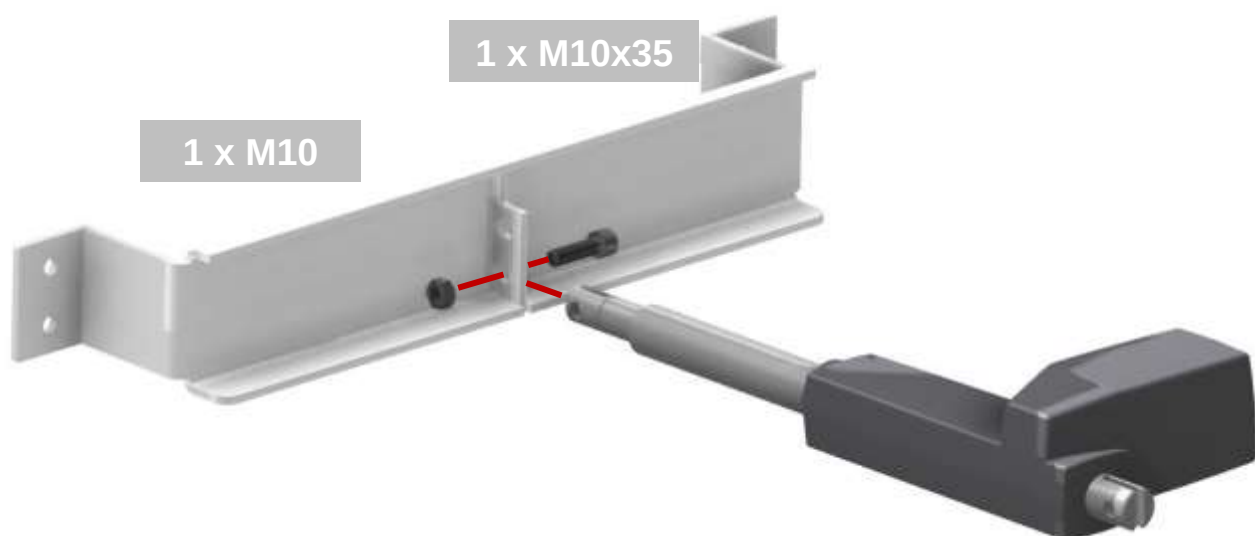


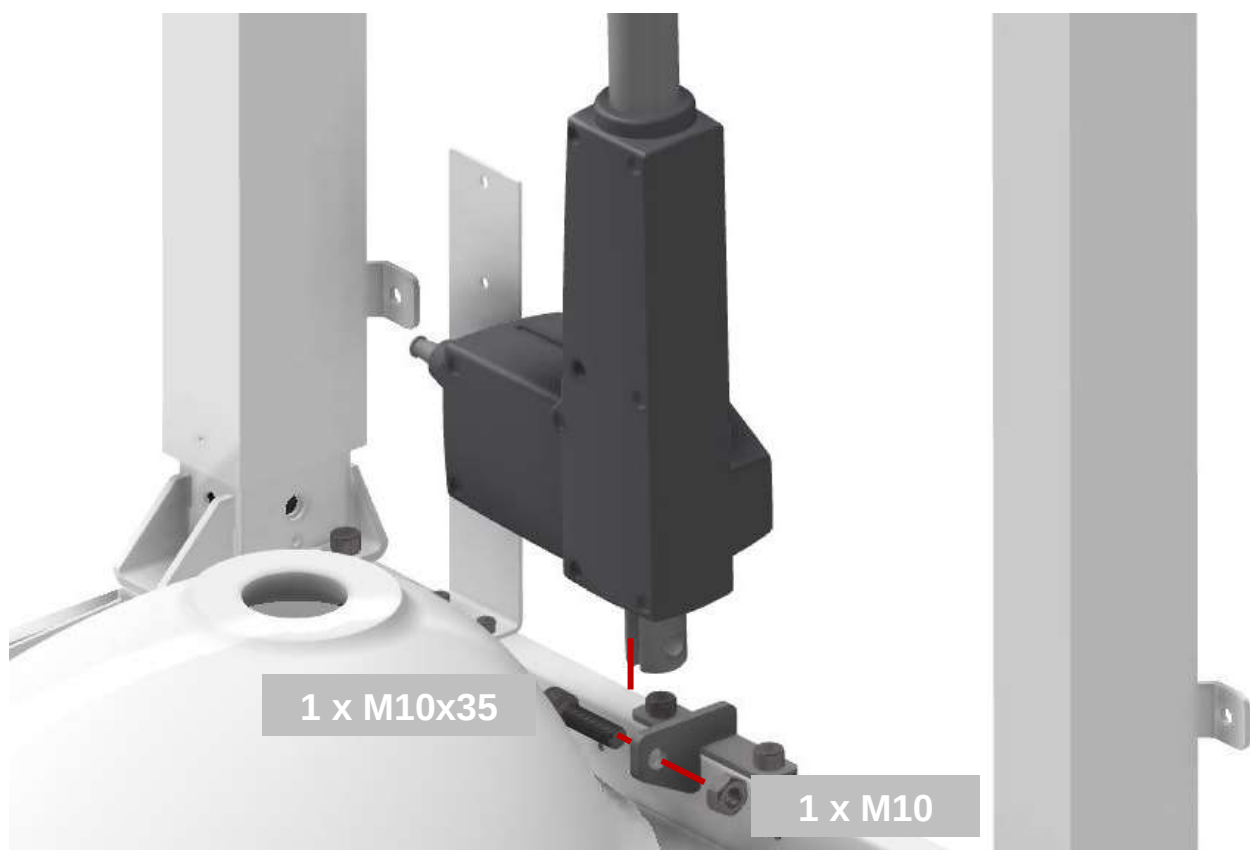


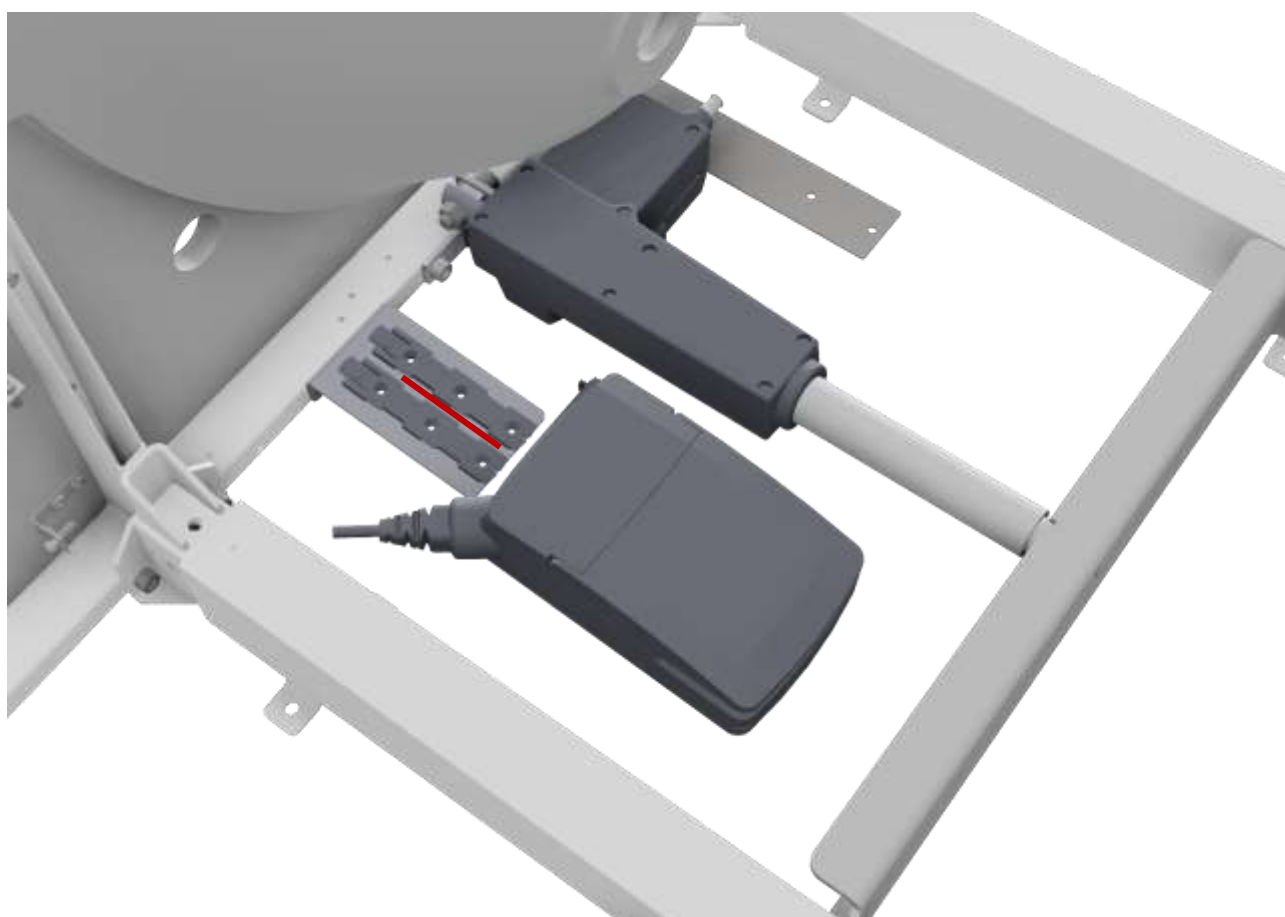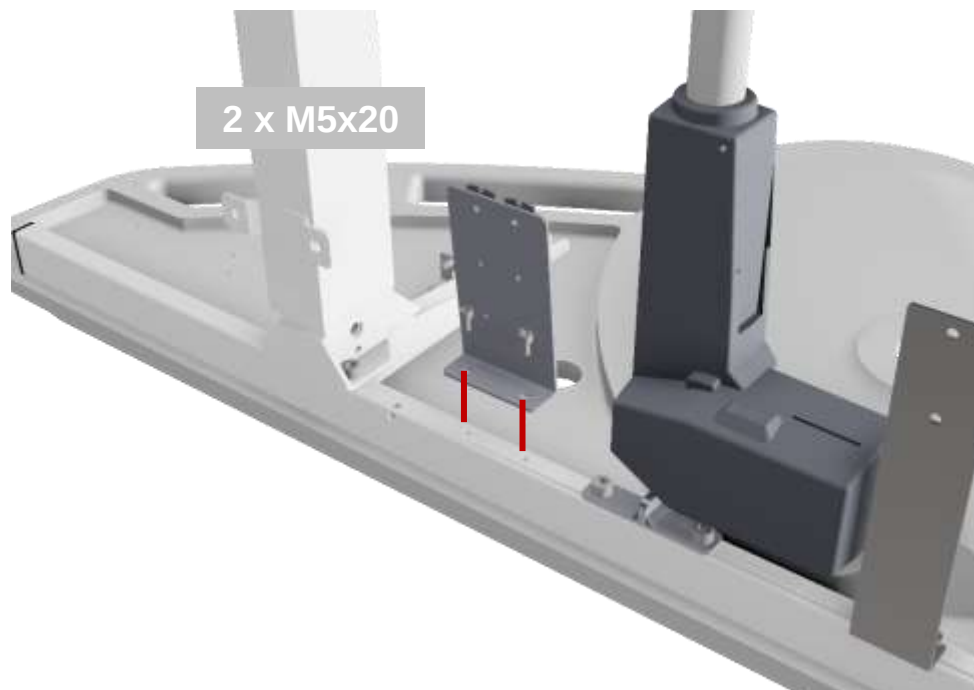

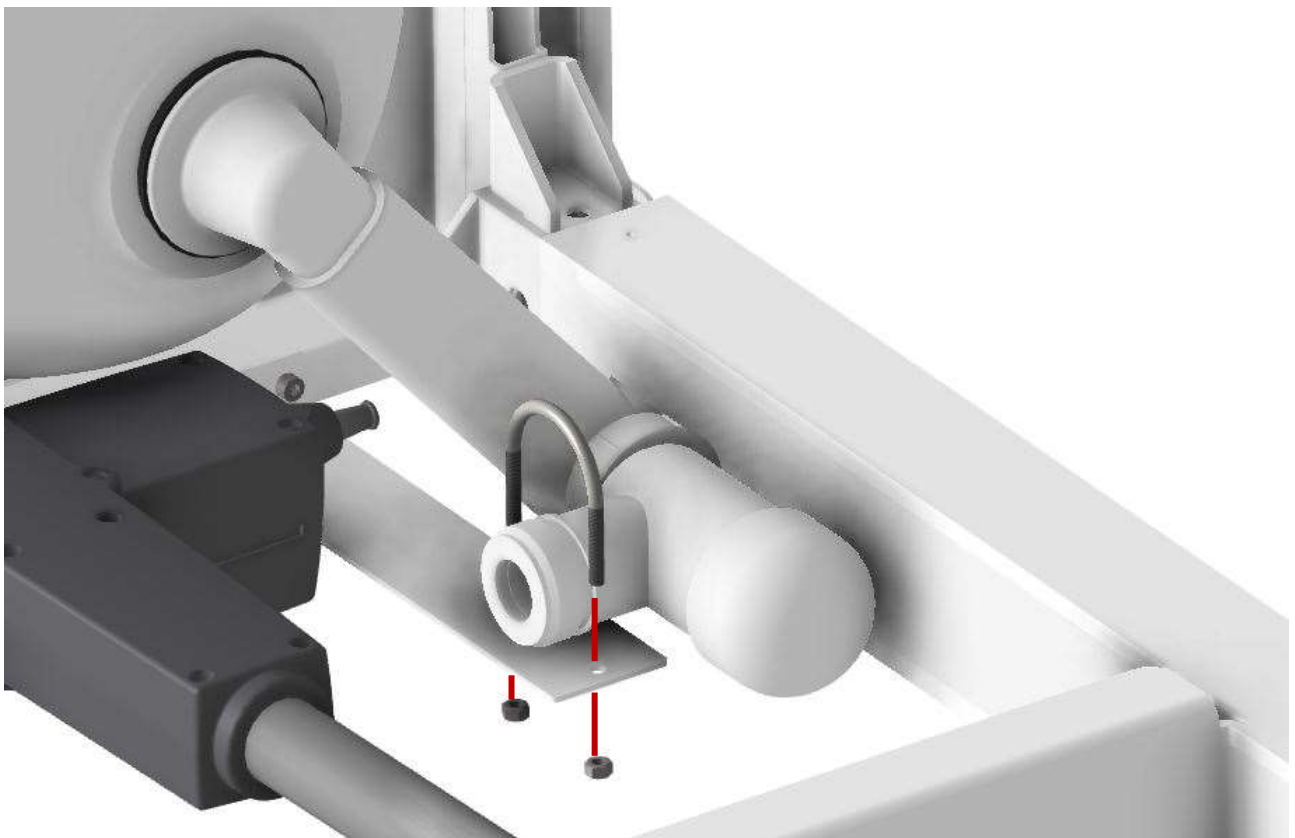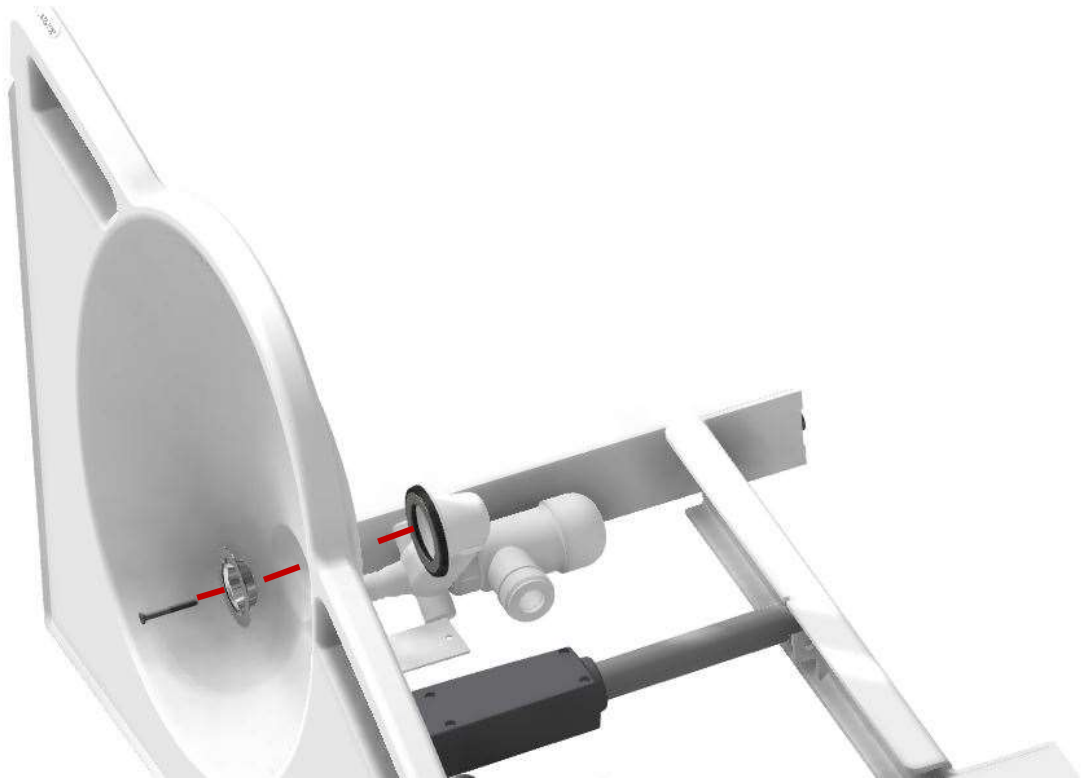


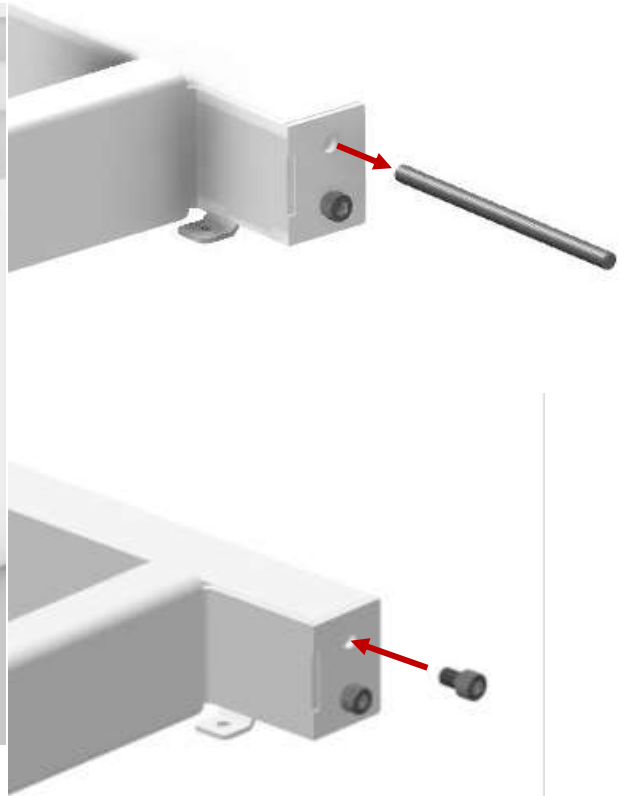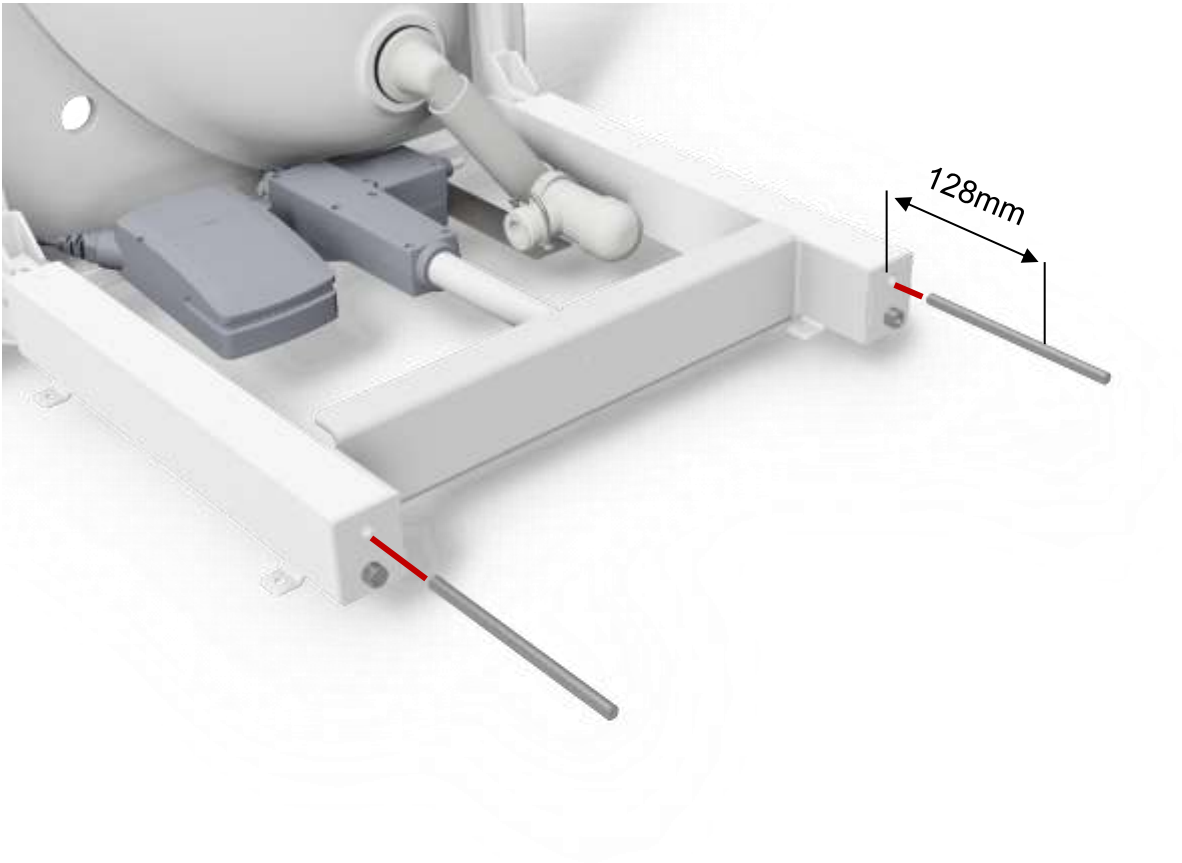


OBS! Alle mål er i mm

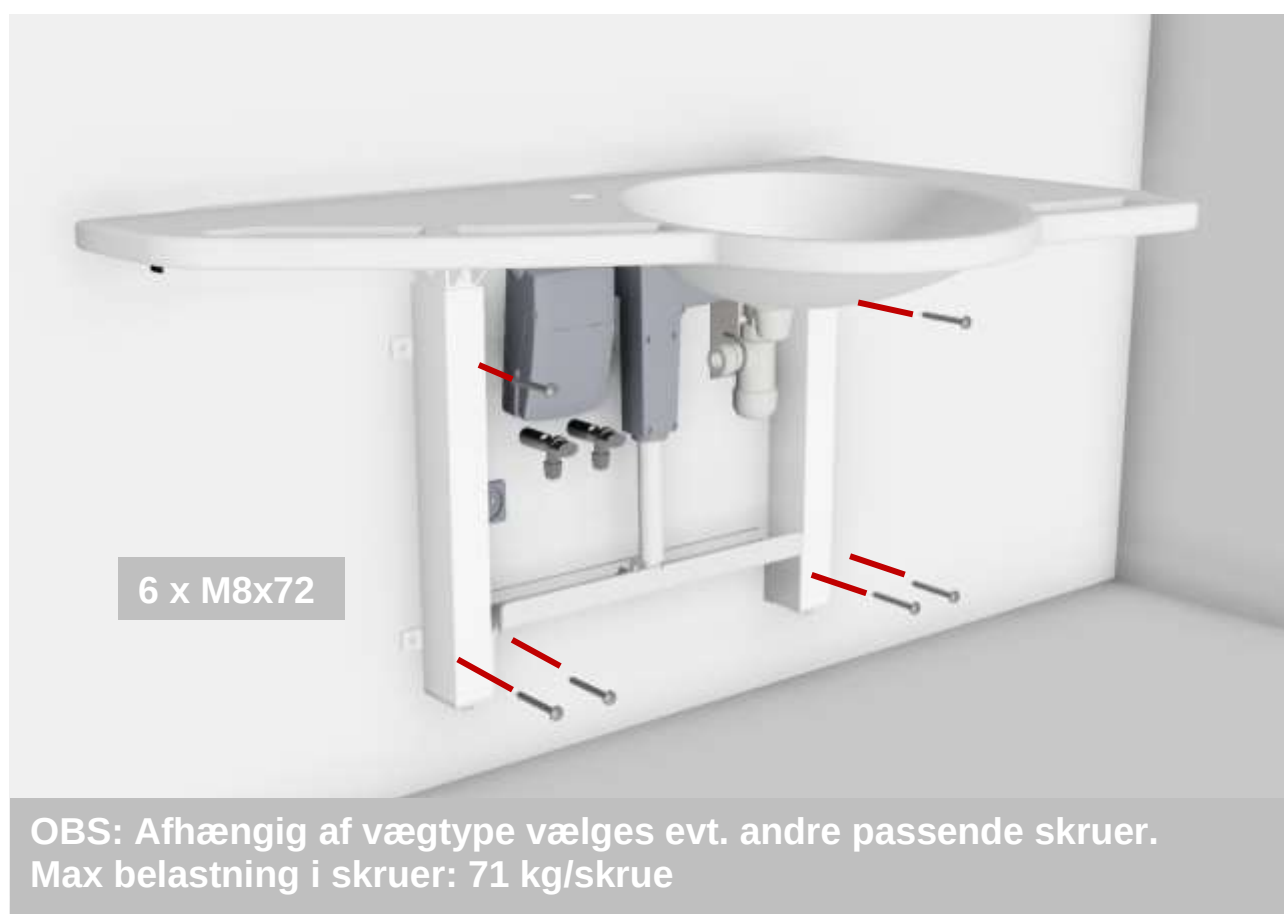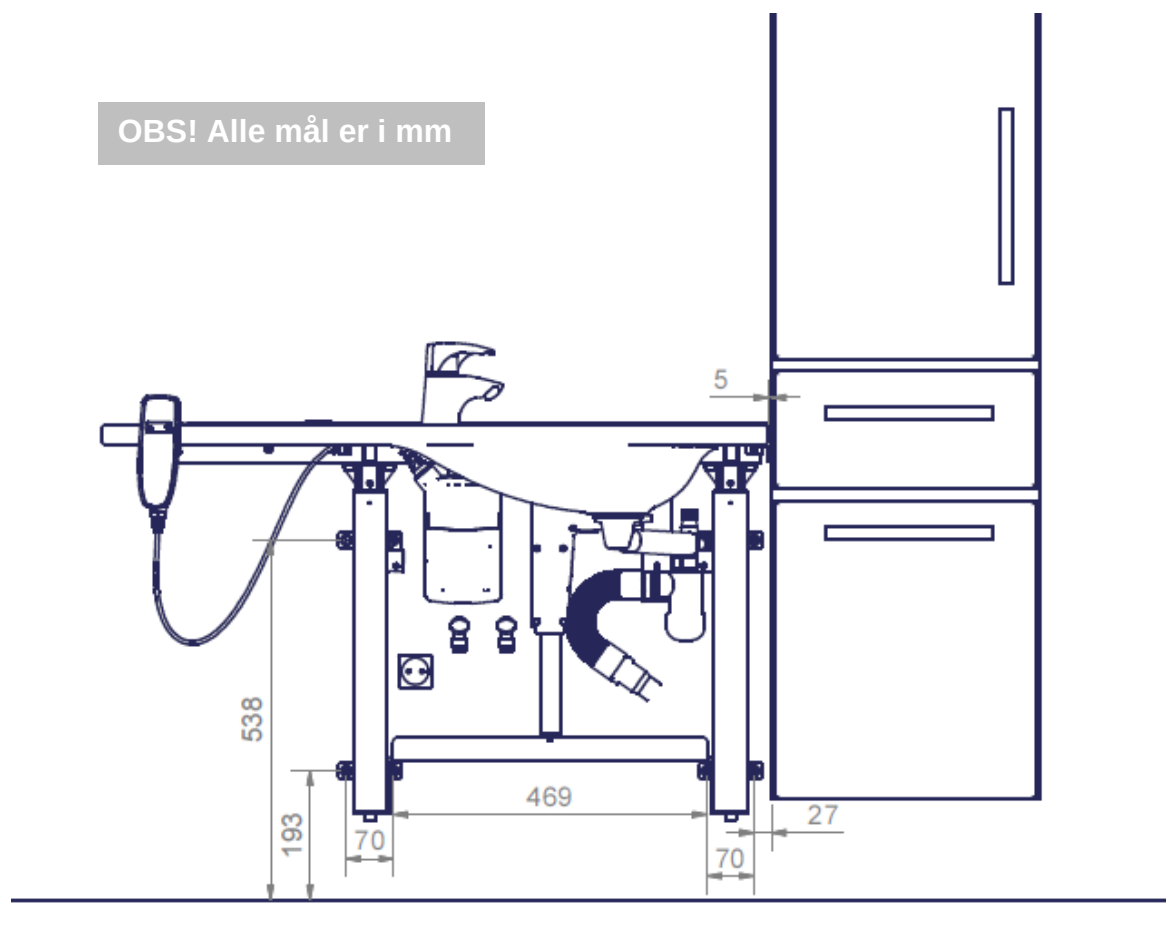

OBS: Blandingsbatteri er tilbehør

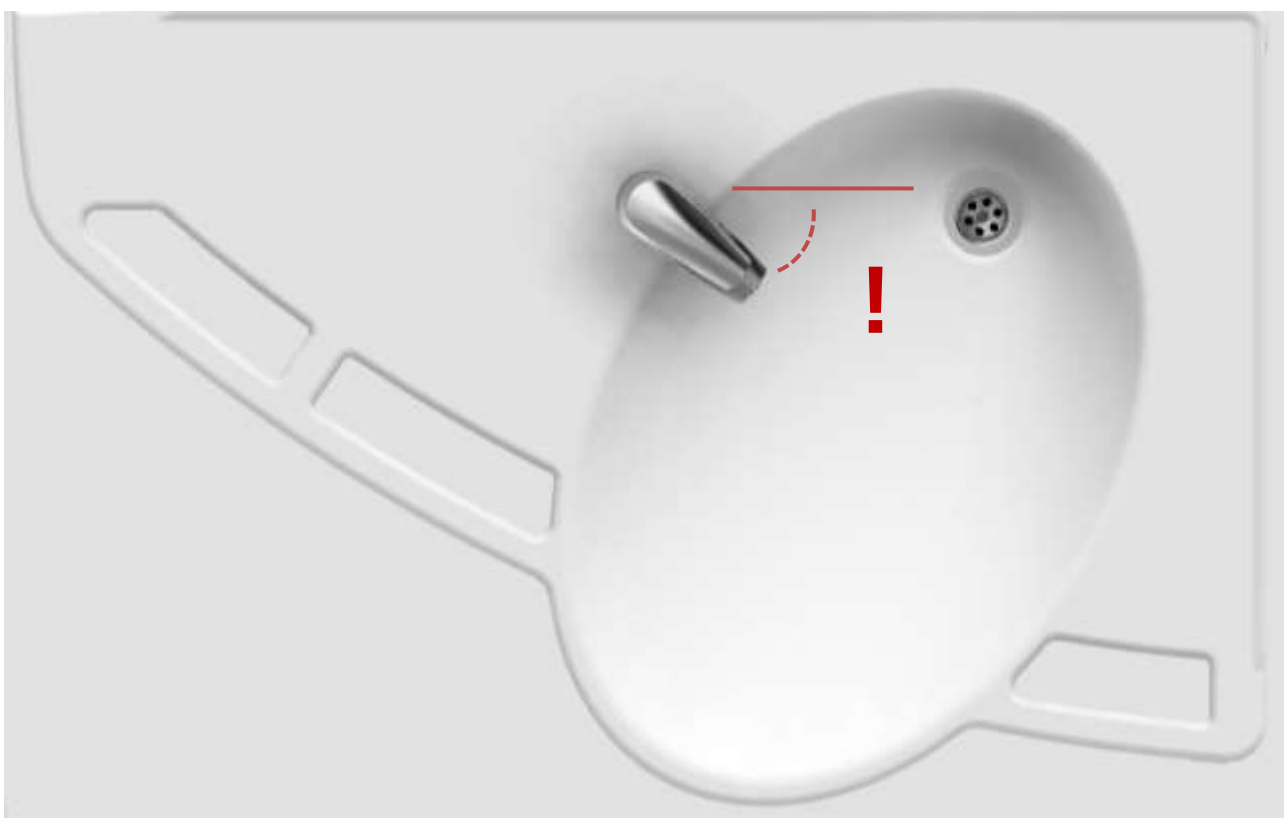

OBS! Alle mål er i mm

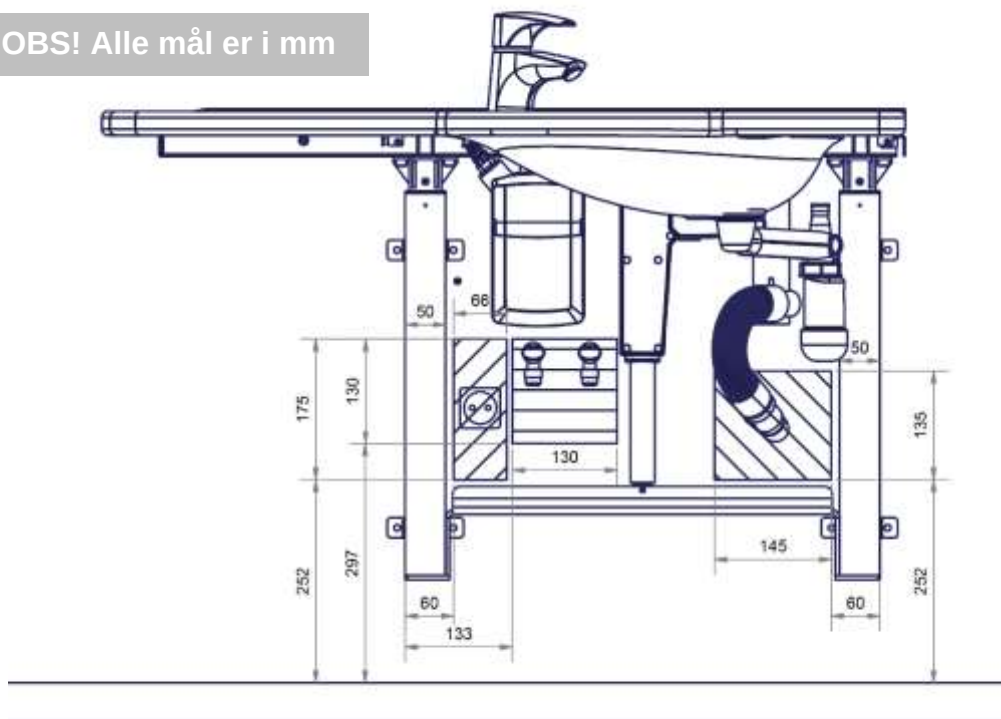

Strips
overskydende
ledninger

Anbefalet
placering af
el-udtag




Ledningsdiagram





Kontroller om slanger og ledninger er monteret korrekt ved at teste om stellet kan køre i top- og bundposition uden problemer

Montage af dækkapper (tilbehør)

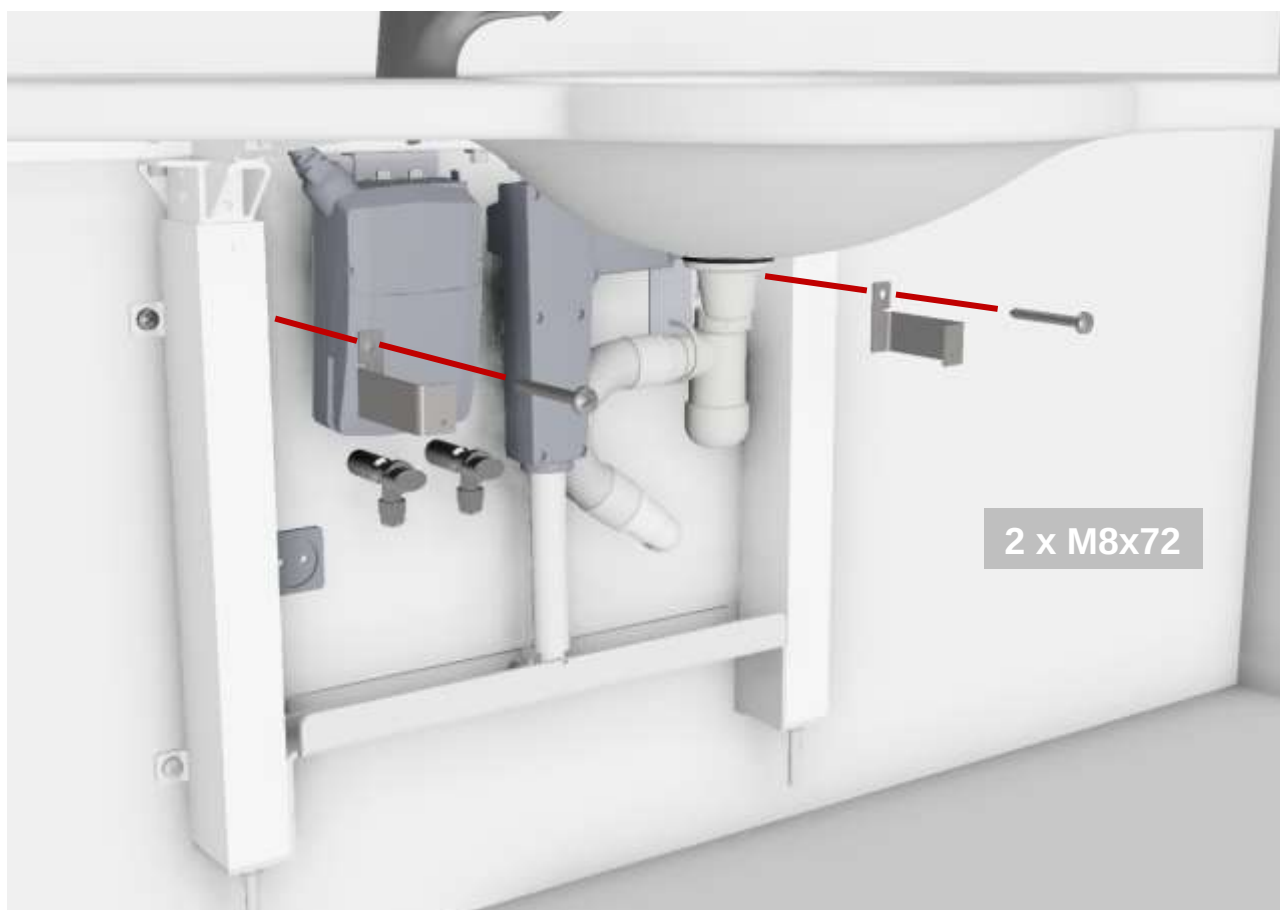



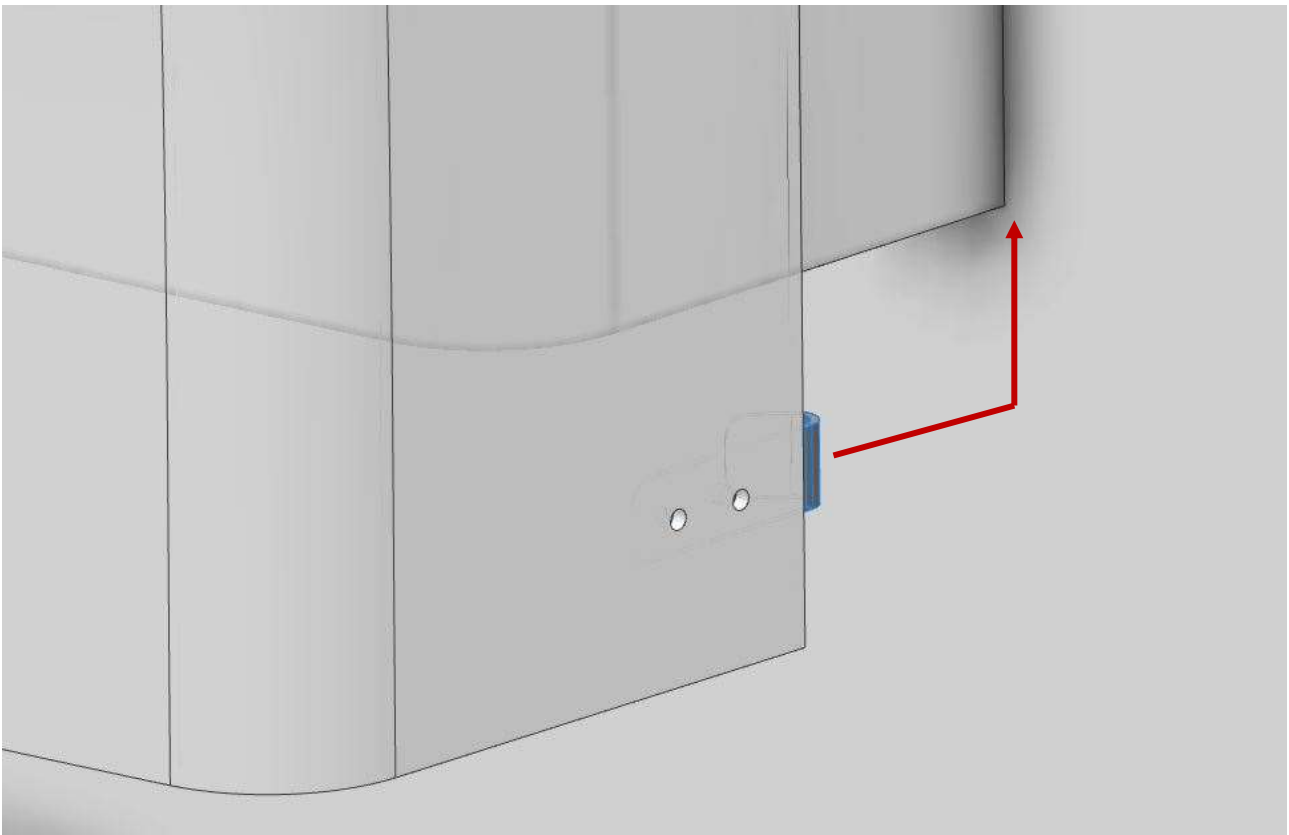

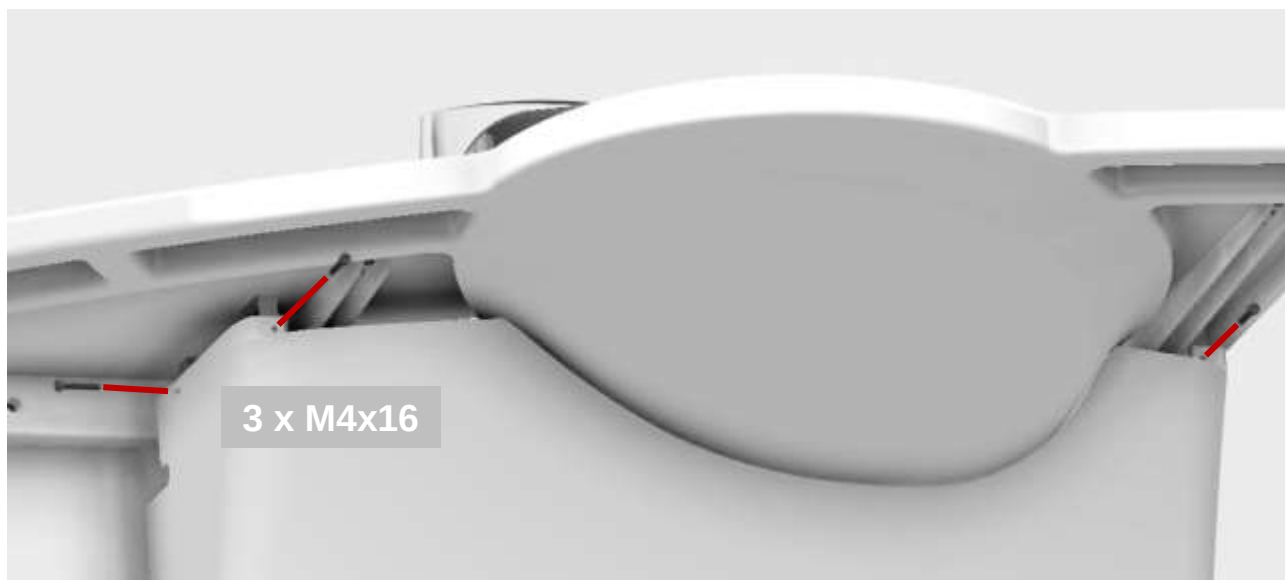



4.4.2 Support Vask Electric højrevendt

40-44017


Bemærk


Sørg for at vasken er placeret på et ridsefrit underlag så længe vasken vender nedad




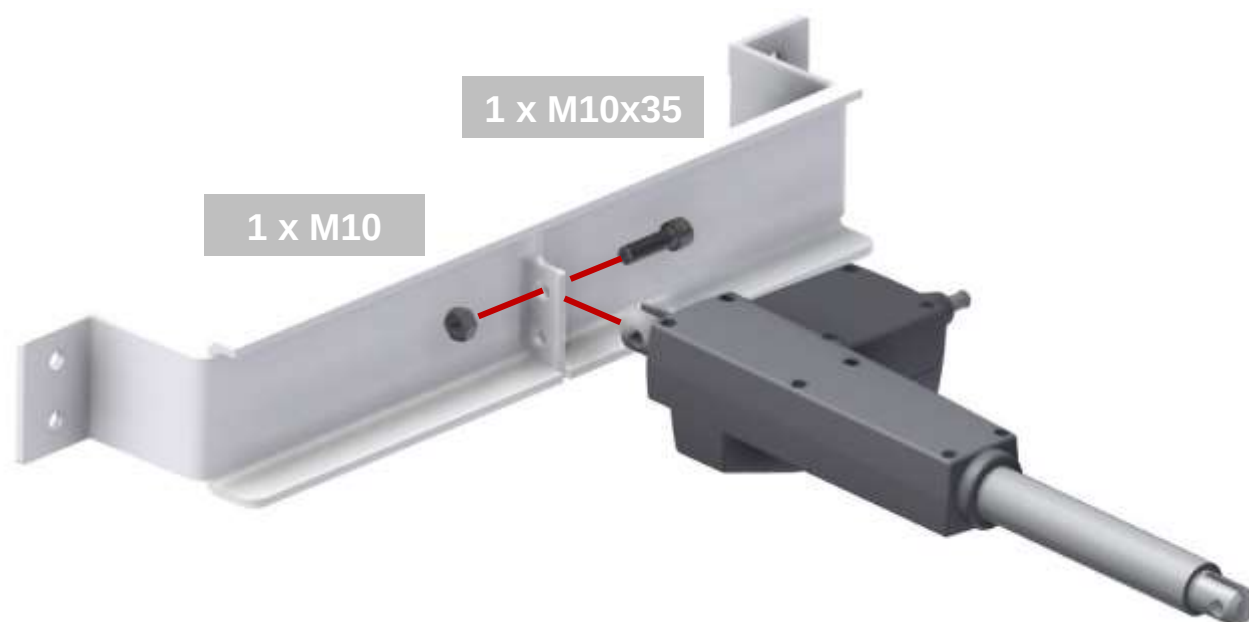
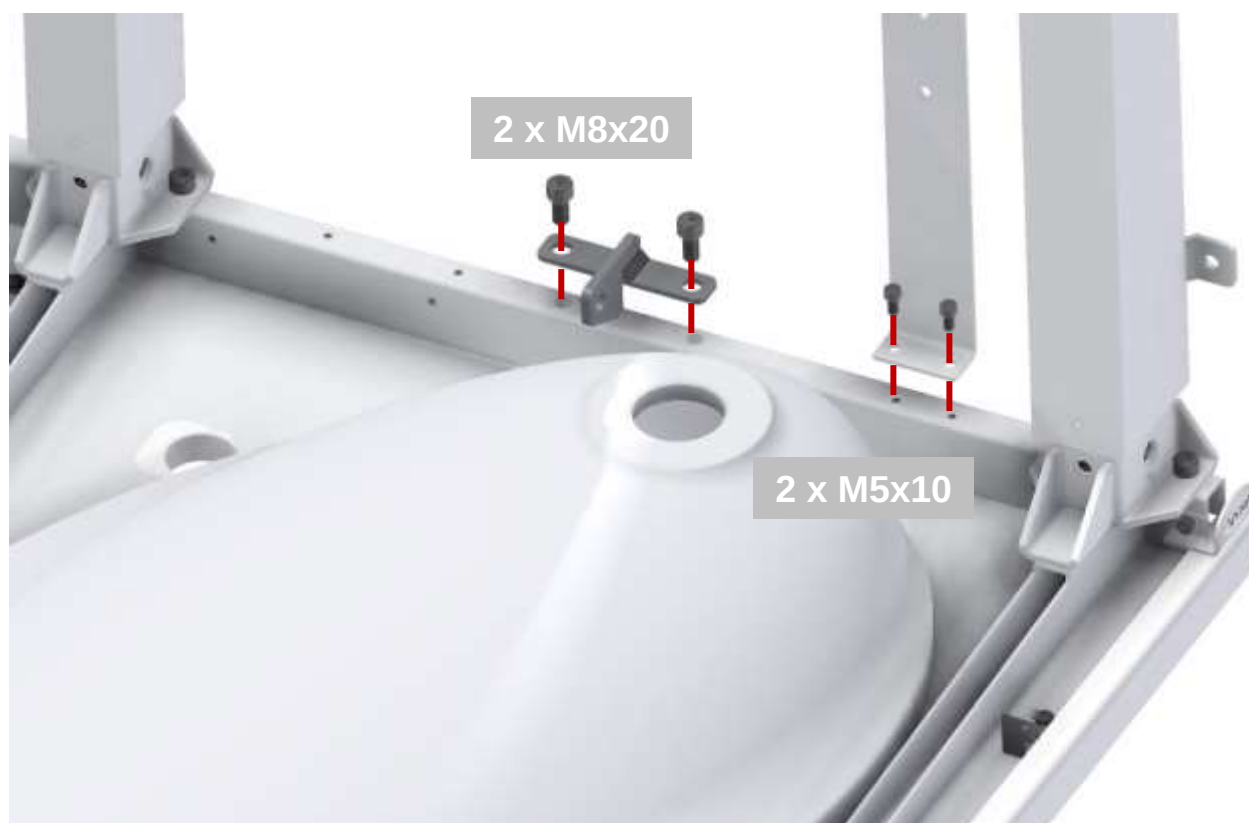






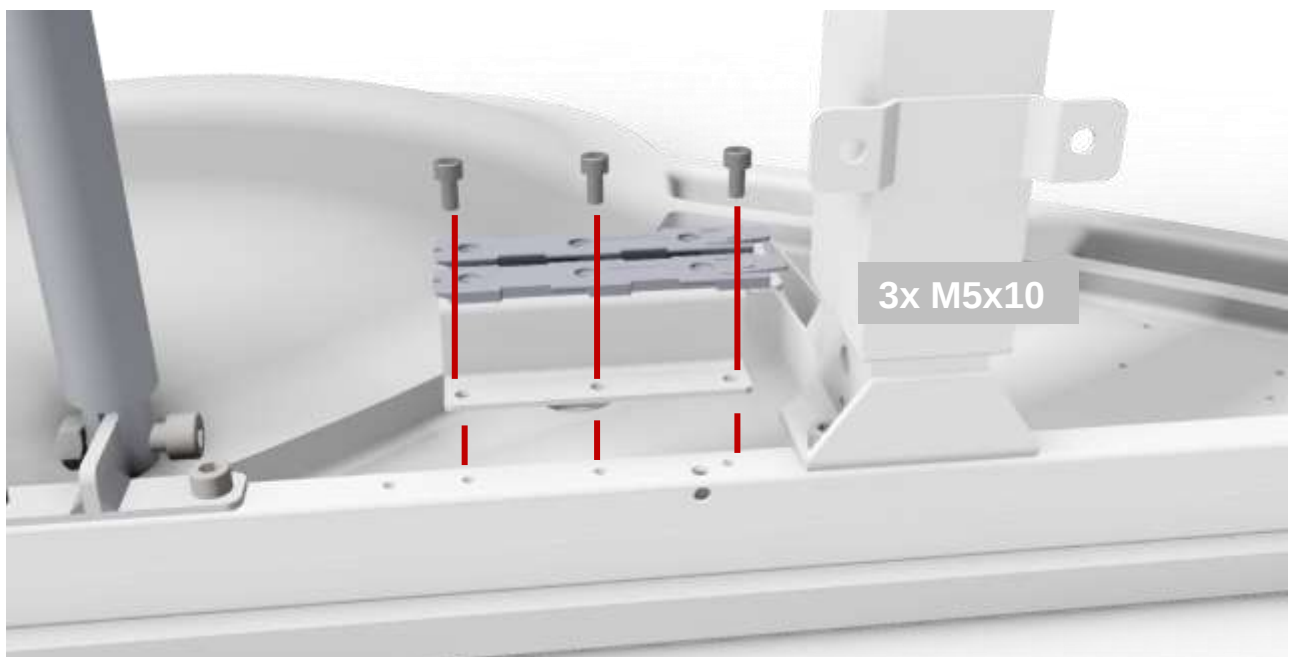

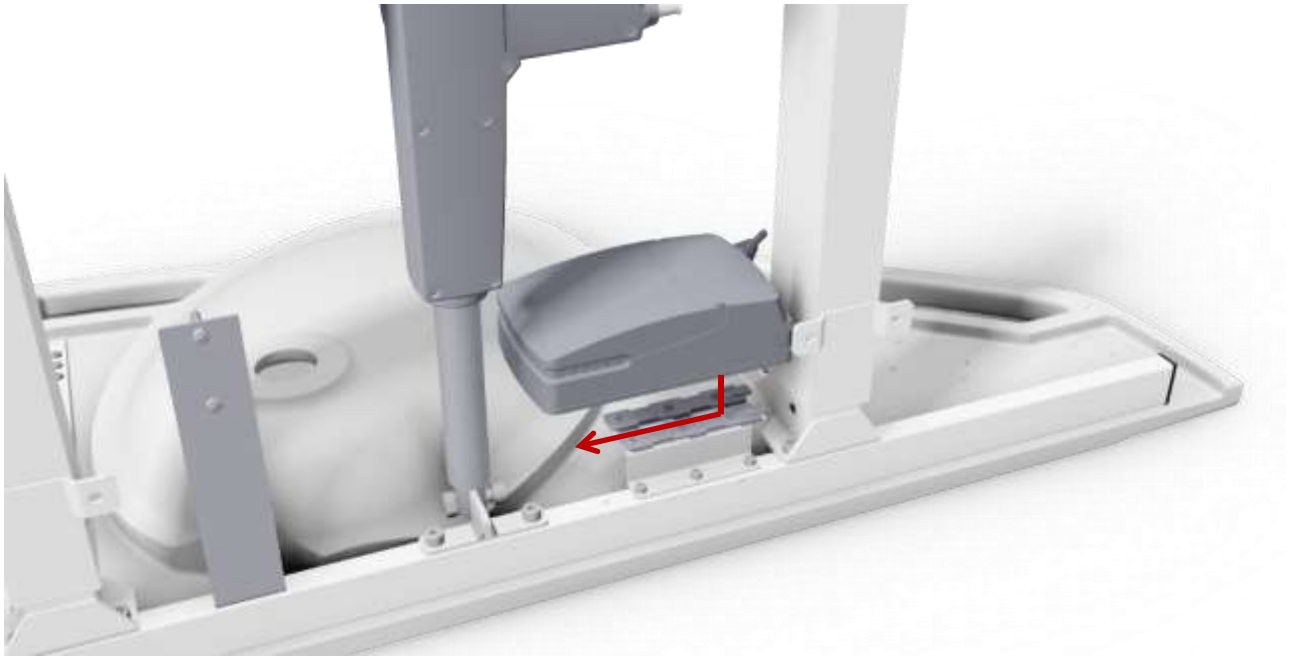





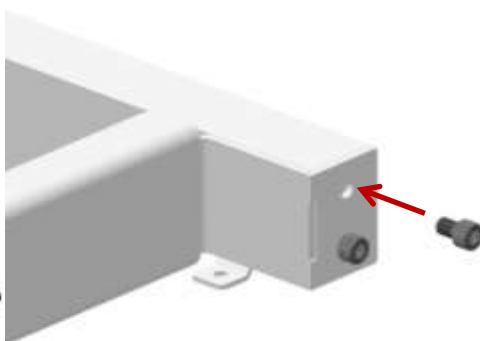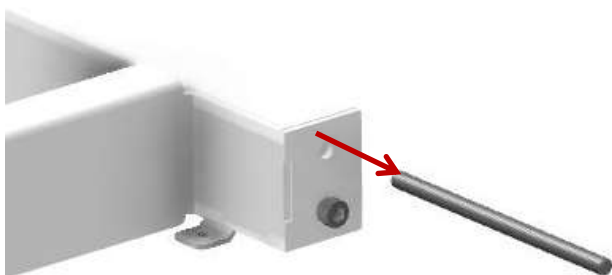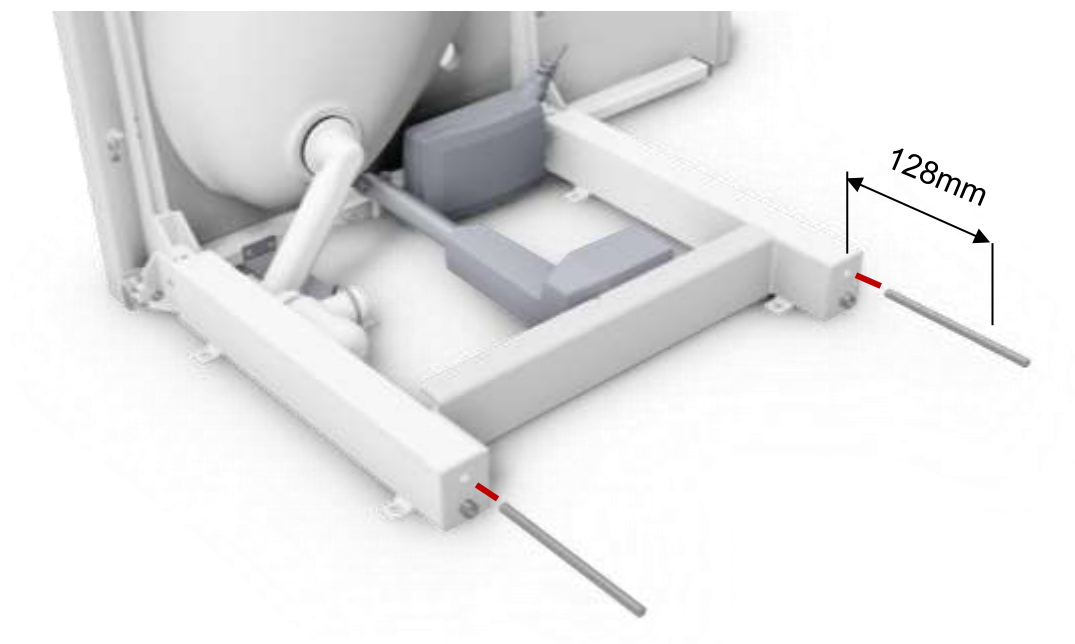


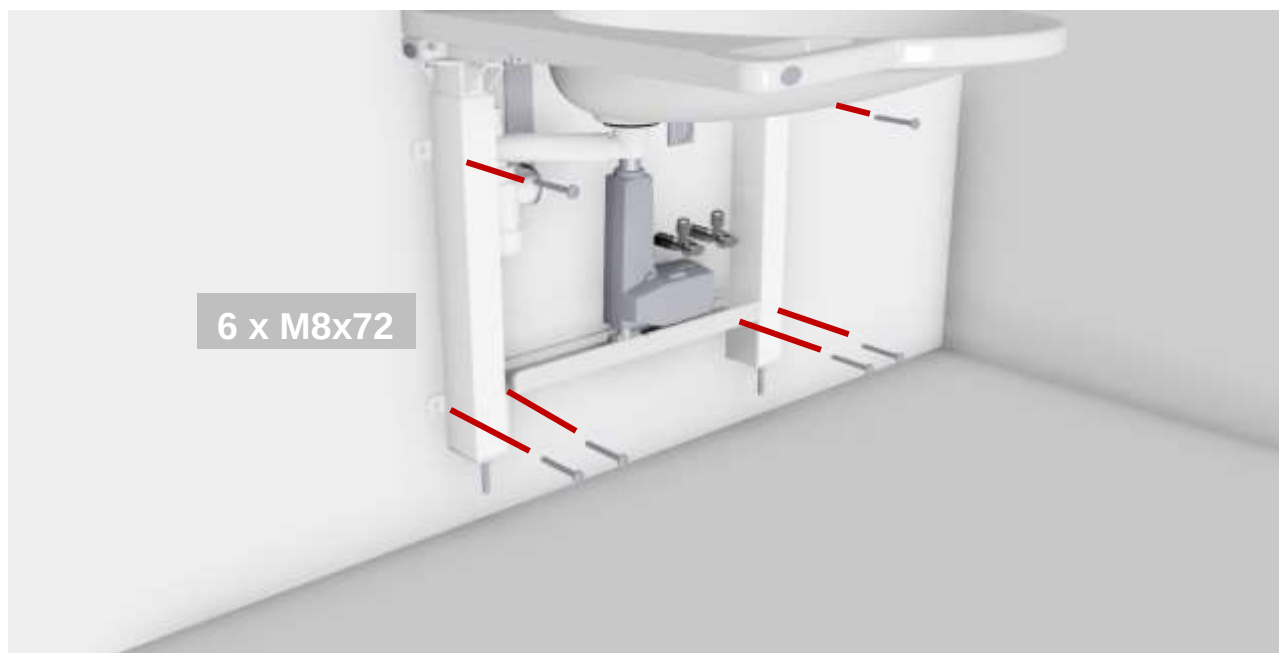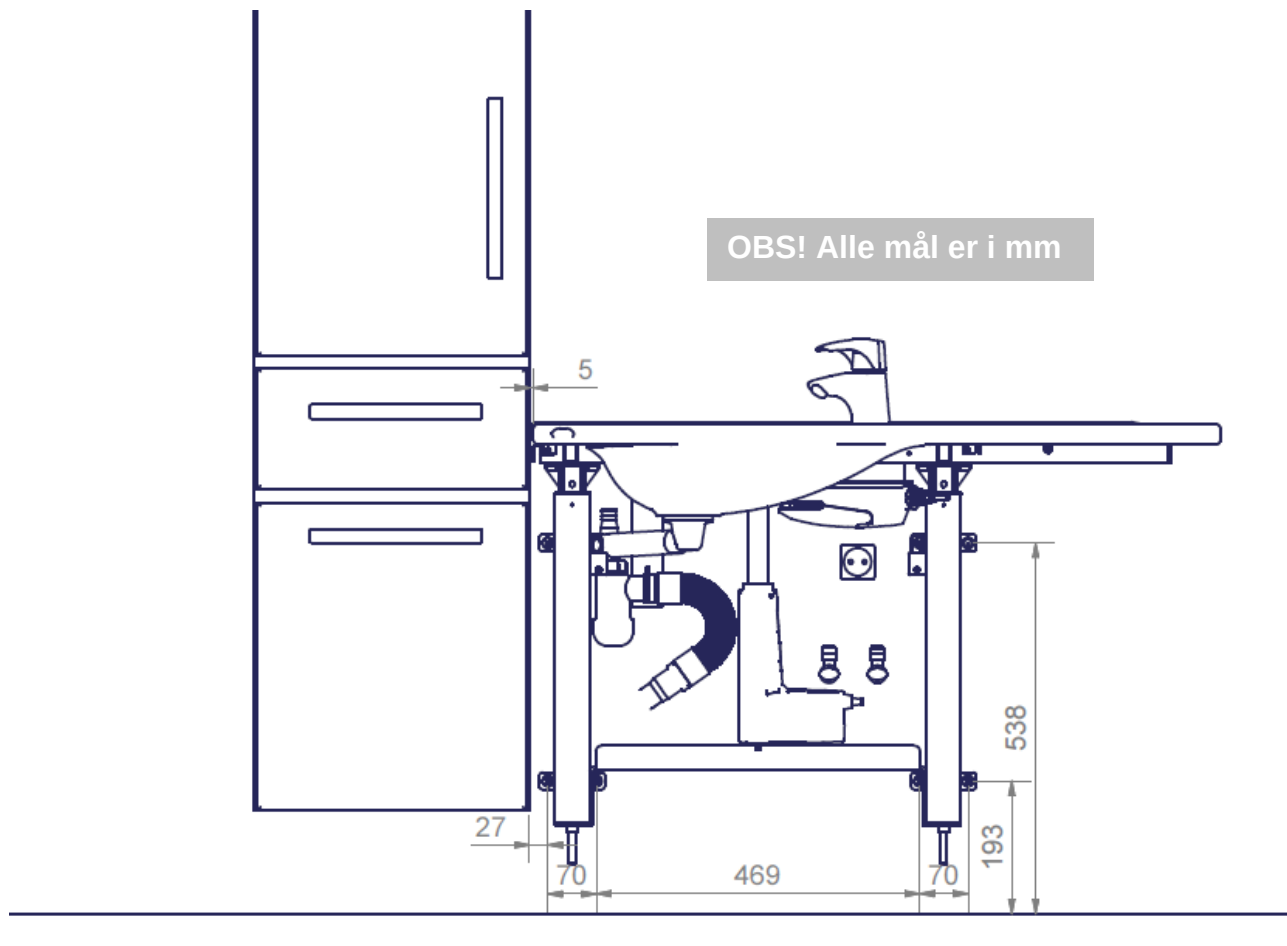


OBS: Afhængig af vægtype vælges evt. andre passende skruer.
Max belastning i skruer: 71 kg/skrue

OBS: Blandingsbatteri er tilbehør

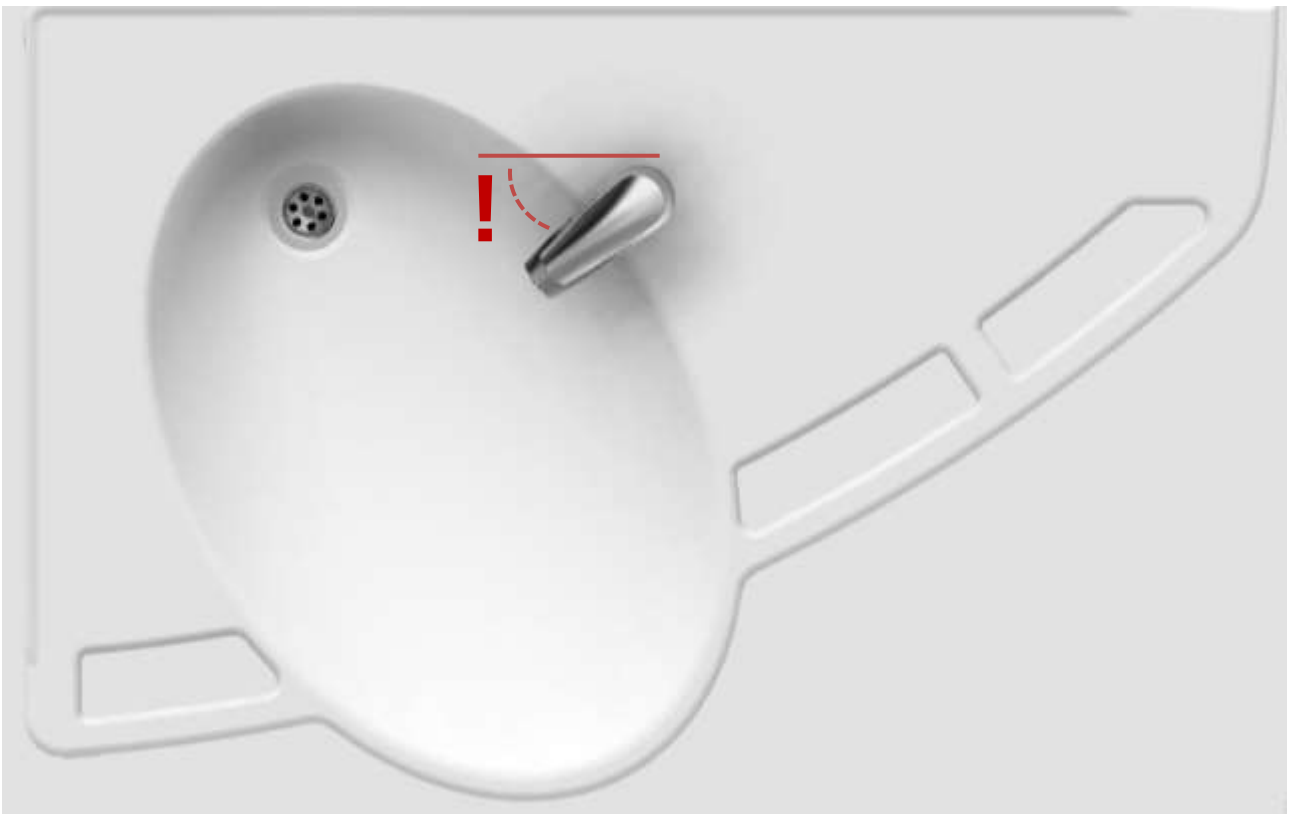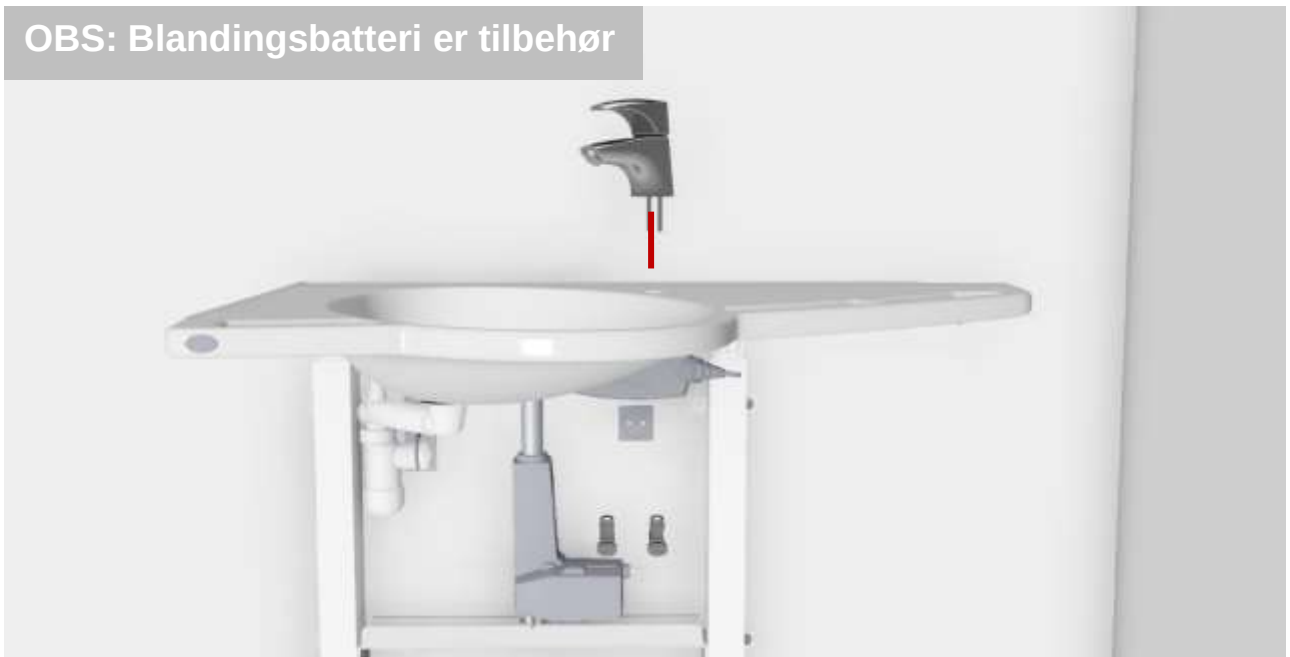

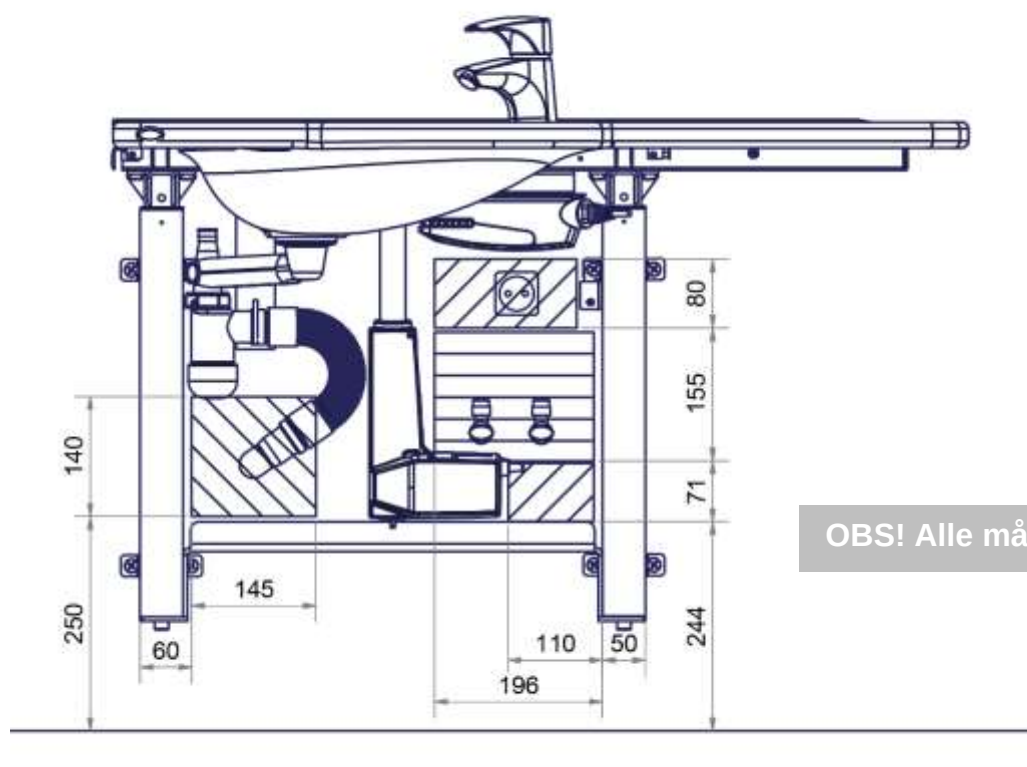



OBS! Alle mål er i mm

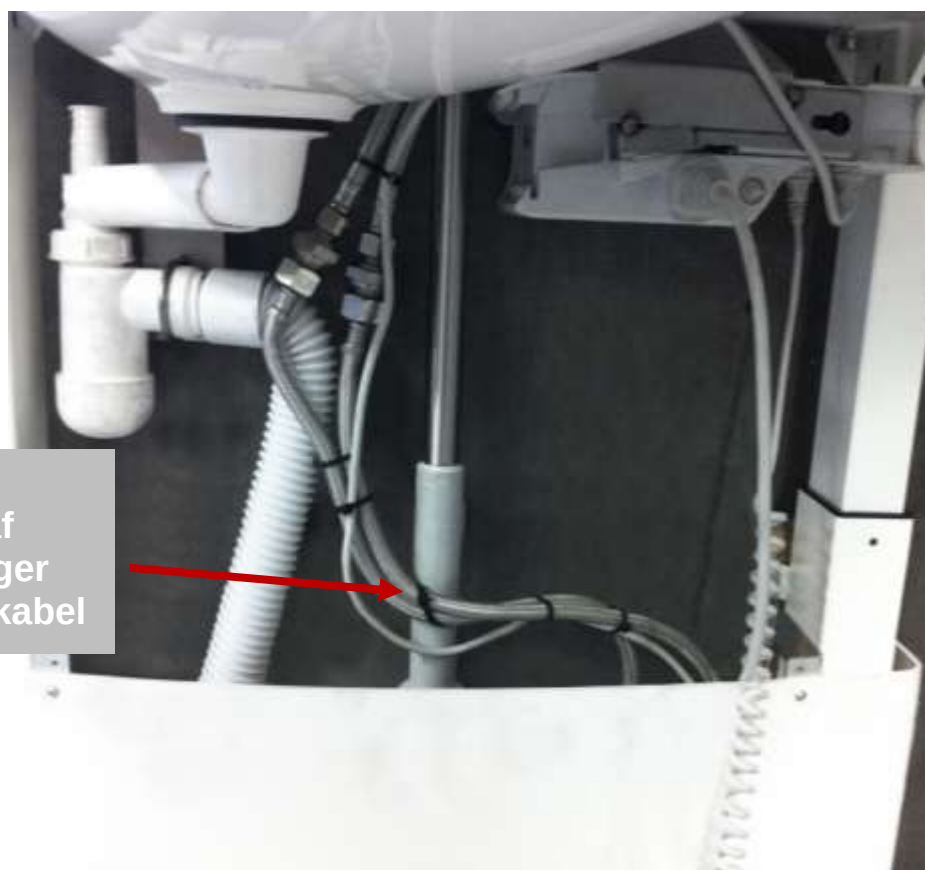


Anbefalet
samling af
vandslanger
og motorkabel

Montage af dækkapper (tilbehør)

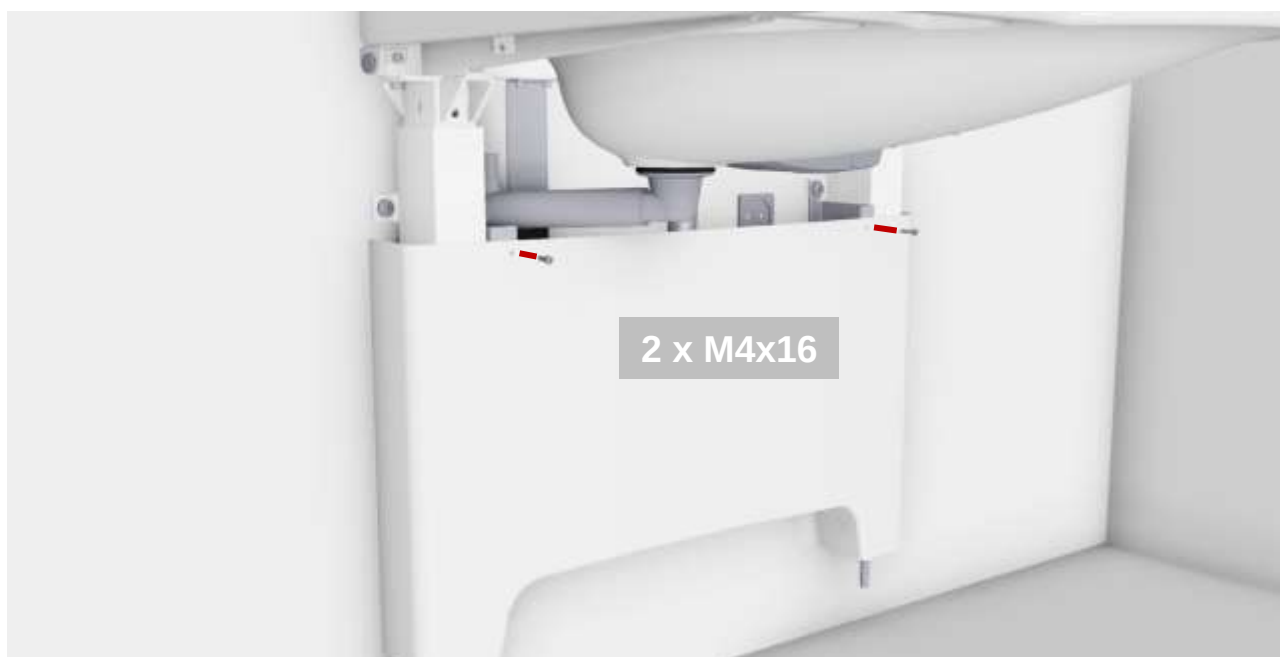

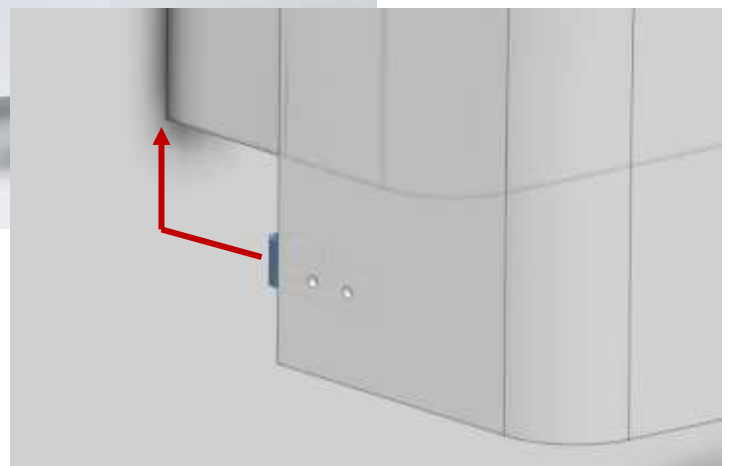

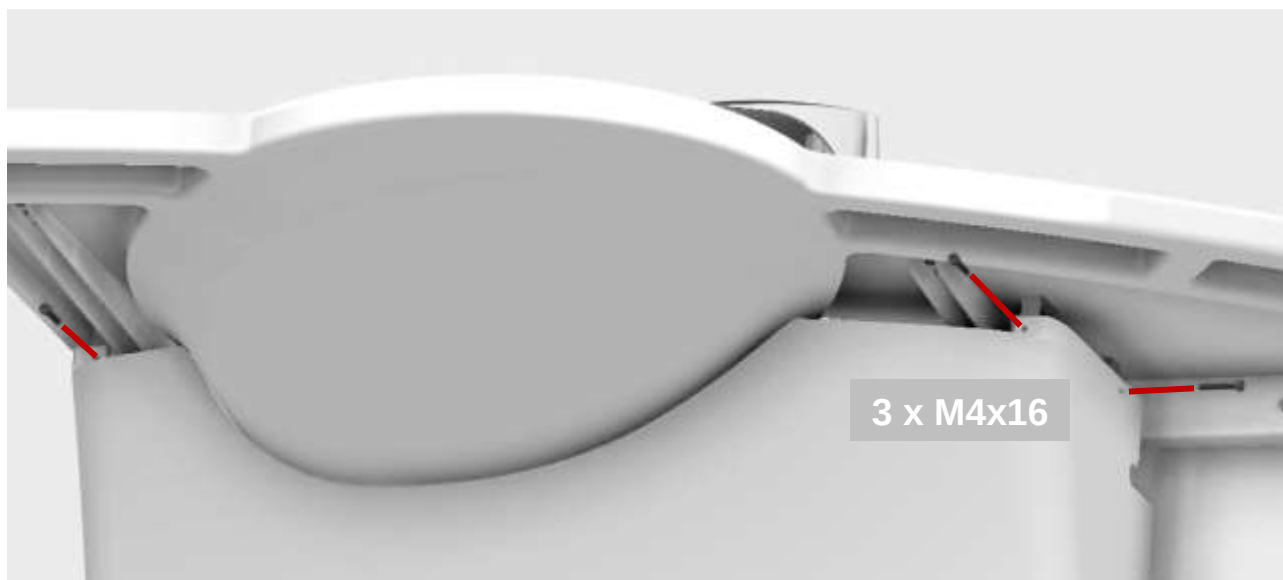

5. Funktionsafprøvning

Efter afsluttet installation og inden ibrugtagning skal der altid udføres en komplet afprøvning af alle funktioner på Support vasken. Efterfølgende skal der altid udføres funktionsafprøvning mindst én gang om året af kompetent personale:

Afprøvning før tilslutning af hovedstrøm:

1. Kontroller at montagevejledningen er overholdt
2. Kontroller at alle boltforbindelser er fastspændt
3. Kontroller at alle kabler er korrekt forbundet, og at stikkene er trykket helt i bund
4. Kontroller at der ikke er belastning på stellet
5. Kontroller at der ikke er noget, som kan hindre stellet i at bevæge sig indenfor højdeindstillingsintervallet.

Tilslut nu hovedstrøm til kontrolboksen og fortsæt afprøvningen:

1. Tryk på begge kontakter på betjeningen og fasthold trykket så længe der lyder en høj bip-lyd, når denne aftager kan stellet køres i bundposition og vil nu være nulstillet.
2. Tryk på NED knappen, kørs stellet i bundposition og kontroller at dette sker på en jævn og kontrolleret måde. Vær opmærksom på at slangetilslutninger følger stallets bevægelse og ikke kommer i klemme.
3. Tryk nu på OP knappen, kørs stellet i øverste position og kontroller at dette sker på en jævn og kontrolleret måde. Vær opmærksom på at slangetilslutninger følger stallets bevægelse og ikke kommer i klemme.

Er ovennævnte punkter opfyldt, kan vasken tages i brug. Se afsnit "Sikker anvendelse".

6. Sikker anvendelse

- Højdejusteringen af Ropox Support Vask Electric må kun anvendes af personer, som har læst og forstået denne instruktion.
- Ropox Support Vask Electric må ikke benyttes som løftebord eller personløfter.
- Enhver anvendelse skal ske på en sådan måde, at risikoen for skader på personer eller ejendom ikke opstår. Det er personen, som betjener højdejusteringen af Ropox Support Vask Electric, der har ansvaret for, at ingen kommer til skade.
- Ved anvendelse i offentlige tilgængelige miljøer, hvor specielt børn, eller andre personer med nedsat observationsevne kan komme i nærheden af Ropox Support Vask Electric, skal den person, som betjener håndvasken, vise tilstrækkelig opmærksomhed for at undgå farlige situationer.
- Vær opmærksom på friplads over og under håndvasken, så den frit kan justeres i højden.
- Overbelast ikke vasken og vær sikker på at belastningsfordelingen er korrekt.
- Højdejusteringen af Ropox Support Vask Electric må ikke anvendes, såfremt der er opstået fejl eller skader.
- Enhver forandring, som kan påvirke dens virkemåde eller opbygning, er ikke tilladt på Ropox Support Vask Electric.
- Vær opmærksom på at, vasken bliver glat når den er våd.
- Vær opmærksom på at, hvis der er vand i vasken når den højdejusteres, så kan det sprøjte på gulvet.
- Vær opmærksom på at, hvis afløb stopper når vandet løber, bliver gulvet vådt.
- Hvis ledning til håndbetjening går i stykker, kan bruger blive udsat for strøm.
- Pas på ikke at snuble i ledning til håndbetjening.
- Installation, service og reparationer må kun udføres af personale, som har tilstrækkelig kompetencer.
- Ved inspektioner, service eller reparationer skal vasken frigøres for last.

7. Placering af betjening



Kabelbetjening kan placeres valgfrit i de tre håndgreb eller på væggen i det medfølgende vægbeslag.



Anbefalet placering af fast betjening (tilkøb) som vist. Hvis anden placering ønskes, skal dette oplyses ved ordre.

8. Rengøring

Rengøring kan udføres med lunkent vand og et egnet universalrengøringsmiddel. Brug en klud eller en blød svamp til at vaske produktet. Tør produktet af med en opvredet klud.

Hvis vandet indeholder meget kalk, vil der ofte dannes kalkaflejringer på håndvasken. Dette fjernes ved mindst en gang om ugen at anvende et rengøringsmiddel som indeholder citronsyre, eddikesyre eller fosforsyre. Lad rengøringsmidlet virke 5-10 minutter alt efter hvor kraftige belægningerne er, og skur godt efter med en blød svamp.

Til overflade desinfektion kan klor-baserede desinfektionsmidler godt bruges, så længe produktspecifikationerne og sikkerhedsforanstaltningerne bliver overholdt, dog må koncentrationen ikke overstige 1.000 ppm aktivt klor.

Derudover kan ethanol-baserede desinfektionsmidler godt bruges, så længe produktspecifikationerne og sikkerhedsforanstaltningerne bliver overholdt.

De følgende midler er blevet testet af Ropox og kan anvendes så længe de er tyndet op ifølge produktanvisningerne.

8.1 Forhåndsgodkendte desinfektionsmidler

Handelsnavn	Opløsning
Diversey Suma Tab D4	1.000 ppm
Rodalon ®	Ethanol 70% v/v

Med det samme efter endt rengøring eller desinfektion, skal produktet tørres af med en klud opvredet i vand, og herefter et tørt viskestykke, da hvis produktet ikke tørres af, kan det blive misfarvet eller plettet, og overfladebehandlingen kan tage skade.

Vær opmærksom på, at efter forlænget brug af produktet, med normale rengøringsintervaller, kan det forventes at produktet vil miste noget glans eller farve. Produktet kan desinficeres uafhængigt af dette.

	Vigtigt! Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder slibende stoffer, f.eks. skurepulver, ståluld, skuresvamp. Dette produkt er ikke designet til at blive steriliseret. Autoklaving og sterilisering ud over normal rengøring kan ændre produktsikkerhed og funktion.
---	--

9. Vedligehold

9.1 Vedligeholdelse

	Bemærk! Manglende overholdelse af regelmæssig vedligeholdelse kan resultere i degradering af produktets funktion og sikkerhed.
---	--

	Bemærk! Ropox vil stille reservedelslister og kredsløbsdiagrammer til rådighed for vedligeholdelse og reparation ud over, hvad der er beskrevet i denne manual. Kun Ropox' originale reservedele må benyttes ved udskiftning af dele. Benyttes andre reservedele kan garantien ophæves i sin helhed. Reparationer ud over, hvad der er beskrevet i denne manual, må kun udføres af Ropox-udpeget servicepersonale
---	---

Stellet er vedligeholdelsesfrit. Smøring af bevægelige dele er foretaget for stallets levetid. Af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige årsager anbefaler vi et årligt eftersyn af stallet:

Ved eftersyn kontrolleres følgende:

- Kontroller at alle boltsamlinger er fastspændt.
- Kontroller at stallet frit og uhindret kan bevæge sig fra nederste position til øverste position uden problemer.
- **Nulstilling af Support Vask:** Hold begge knapper nede på betjeningen. Det markeres med en lydindikation i form af en bip-tone. Hold knapperne indtil bip-tonen ophører. Herefter kan stallet køres ned i bundposition for nulstilling. Kontroller at bevægelsen sker på en jævn og kontrolleret måde. Vær opmærksom på, at net ledningen skal kunne bevæge sig frit.
- Kontroller at eventuelle vandtilslutningsslanger og afløbsslanger er tætte og funktionsdygtige.
- Kontroller at alle ledninger er monteret korrekt og er i ubeskadiget stand.

Efter hvert eftersyn skal serviceskemaet udfyldes.

9.2 Serviceskema, drift og vedligeholdelse

Service og vedligeholdelse Serie nr.

Dato:

Underskrift:

Kommentarer:

Service og vedligeholdelse Serie nr.

Dato:

Underskrift:

Kommentarer:

Service og vedligeholdelse Serie nr.

Dato:

Underskrift:

Kommentarer:

Service og vedligeholdelse Serie nr.

Dato:

Underskrift:

Kommentarer:

Service og vedligeholdelse Serie nr.

Dato:

Underskrift:

Kommentarer:

Service og vedligeholdelse Serie nr.

Dato:

Underskrift:

Kommentarer:

Service og vedligeholdelse Serie nr.

Dato:

Underskrift:

Kommentarer:

Service og vedligeholdelse Serie nr.

Dato:

Underskrift:

Kommentarer:

10. Fejlsøgning

Reset:

Tryk og hold samtidig på både op (▲) og ned (▼) knappen. Fasthold dette tryk indtil kontrolboksen har "bippet" ca. 10 gange. Herefter kan stellet køres ned i bundposition for reset.

Problem	Løsning
Vasken kører ikke op eller ned ved tryk på håndbetjeningen	Undersøg om: ➤ 230V er tilsluttet, og om der er strøm. ➤ Motor er forbundet til kontrolboksen. ➤ Håndbetjening er forbundet til kontrolboksen. ➤ Motor er overbelast (Husk for hver 2 min brug skal der være 18 min hvile)
Håndbetjening defekt	Undersøg om: ➤ Vask kan højdejusteres med en anden betjening
Ved tryk på op eller ned knapperne fremkommer kun "klik" lyde fra kontrolboksen, ingen bevægelse	➤ Kan skyldes at stik ikke er monteret korrekt. ➤ Demonter alle kabler fra kontrolboksen, og monter igen. ➤ Måske kræves også en "Reset"
Stellet virker løst eller ustabil	➤ Efterspænd alle stelletts skruer jævnt før montagevejledning.
Håndvasken kan ikke justeres i højden eller føles meget svær at justere.	➤ Kontroller at der ikke sidder noget i klemme som forhindrer højdejusteringen.
Vandet løber ikke hurtigt nok ud af vasken.	➤ Kontroller vandlåsen for tilstopning og rens eventuelt denne. ➤ Kontroller at den fleksible slange ikke monteret på væggen så højt at denne danner en ekstra vandlås. Jævnfør anbefalinger i afsnittet "Installationsgrænseflader"

11. Reservedele

Håndbetjening V.nr. 97001655	
Motor V.nr. 97000483	
Kontrolboks V.nr. 97001691	

	Forsigtig! Kun Ropox' originale reservedele må benyttes ved udskiftning af dele. Benyttes andre reservedele kan garantien ophæves i sin helhed.
---	---

12. Miljøhensyn

Produktet er ikke beregnet til bortskaffelse som kommunalt affald. Korrekt demontering, sortering og bortskaffelse af komponenter skal udføres af affaldshåndtering.



Komponent	Bortskaffelses anbefaling
Vask	Keramik
Unit	Jern
Blandingsbatteri	Jern
Dækplade	Plastik
Kontrolboks	Elektronik
Motor	Elektronik

13. Elektromagnetisk kompatibilitet

13.1 Egnede omgivelser

Produktet er egnet til brug i hjemmet, i dagcentre, dagcentre for personer med fysiske eller psykiske handicap eller på hospitaler, undtagen nært aktiv HF-kirurgisk udstyr og RF-afskærmet rum til et elektromedicinsk system til magnetisk resonansbilleddannelse, hvor intensiteten af elektromagnetiske forstyrrelser er høj.

13.2 Tilstødende og stablet brug

	Advarsel! Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr bør undgås, da det kan medføre ukorrekt drift. Hvis sådan brug er nødvendig, skal dette udstyr og andet udstyr observeres inden brug for at kontrollere, at de fungerer normalt.
--	---

13.3 Kabler

Kabel komponent	Længde
Strømkabel	3,2m
Håndbetjening	Ca. 5m udfoldet

	Advarsel! Brug af tilbehør, transducere og kabler bortset fra dem, der er angivet eller leveret af producenten, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og resultere i ukorrekt drift.
--	--

13.4 RF mobilt udstyr

	Advarsel! Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr som antennekabler, eksterne antenner og mobiltelefoner) bør ikke bruges nærmere end 30 cm (12 inches) til en hvilken som helst del af produktet, herunder kabler angivet af fabrikanten. Overholdes dette ikke kan ydeevnen af produktet blive kompromitteret som resultat heraf.
--	--

14. Reklamation

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser på www.ropox.dk



ROPOX A/S

Ringstedgade 221

DK – 4700 Næstved

Tel.: +45 55 75 05 00 Fax.: +45 55 75 05 50

E-mail: info@ropox.dk

www.ropox.dk