



DIT FLEKSIBLE KØKKEN

HØJ BRUGERVENLIGHED  
OG FRIHED TIL  
AT VÆRE DIG

**ROPOX**  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS



## FORDI DAGLIGDAGEN ER VIGTIG FOR DIG

Den daglige brug af køkkenet er en vigtig ingrediens i vores liv og tilberedning af mad er en naturlig del af vores hverdag.

### Vores mål er, at du kan være fri, selvstændig og tryk i eget køkken

I 35 år har brugere verden over glædet sig over fleksibiliteten og brugervenligheden i Ropox køkkener. Med vores løsninger bliver det køkken du vælger fleksibelt, så du selvstændigt kan løse flest mulige opgaver i køkkenet. Det multifunktionelle køkken giver mulighed for, at flere kan tilberede mad i køkkenet på samme tid og dermed bidrage til det sociale samvær, der er så vigtigt i dagligdagen.

Hold dig aktiv og øg din livskvalitet.





## INDHOLD

- 04** DIT MULTIFUNKTIONELLE KØKKEN  
Vi rådgiver dig i valget af netop din køkkenløsning.
- 06** DIT KØKKENBORD NÅR NYE HØJDER  
Lige meget hvilken aktivitet du foretager dig i køkkenet, er det dig, der bestemmer bordhøjden.
- 08** OVERSKABENE KOMMER TIL DIG  
Uanset hvilken af vores løsninger du vælger, er målet, at du kan nå alt i dine skabe.
- 10** RÅD & VEJLEDNING  
OM INDRETNING AF KØKKENER  
Ropox kan meget mere end at lave køkkenløsninger.

”Nyd livet i køkkenet  
- uanset om du er høj eller lav”



## Dit multifunktionelle køkken

### ROPOX RÅDGIVER DIG TIL DEN BEDSTE LØSNING

Ropox står klar til at rådgive dig i valg af din køkkenløsning, hvor der er taget hensyn til optimal pladsudnyttelse, der forbedrer din livskvalitet. Brug os allerede fra planlægningsstadiet af byggeriet, og udnyt vores mere end 35 års erfaring, så vi sammen kan matche dine behov. Herved bliver det endelige resultat perfekt.

Det multifunktionelle køkken er fleksibelt og giver mulighed for en lang række individuelle løsninger til f.eks. ældreboliger, specialskoler, plejecentre, trænings- og institutionskøkkener samt private hjem. Alle højdejusterbare løsninger er skjulte og er enten elektriske eller manuelt betjente. Systemerne er stabile, sikre og udført i højeste kvalitet, og er enkle at montere.





Ideelt som både spisebord og arbejdsbord



Special løsninger kan også udarbejdes



Ropox bremsehjul

ROPOX

## 4Single stel


- Ideelt til hele familien - stor, lille, ung, ældre eller kørestolsbruger.
- Højden justeres med håndsving, fjernbetjening eller ved tryk på betjening.
- Stellet tilpasses den bordplade du har, helt op til 300 x 200 cm.
- Kogeplade eller vask kan installeres i pladen.
- Med solide bremsehjul kan bordet placeres efter behov.
- Multifunktionelt stel, der kan benyttes til mange aktiviteter i køkken/alrum.
- Fuldt opladt batteri der kan holde i op til 3 måneder.
- Kan leveres med batteriløsning, så generende ledninger fjernes/undgås.
- Stellet kan belastes med op til 250 kg.



## DIT KØKKENBORD NÅR NYE HØJDER

Lige meget hvilken aktivitet du foretager dig i køkkenet, er det dig der bestemmer bordhøjden! Alle bordpladeløsninger kan hurtigt og enkelt tilpasses i højden således, at brugeren kan blive mere selvhjulpne og få optimale arbejdsbetingelser i køkkenet. Vores løsninger giver desuden den siddende bruger optimal plads til benene og mulighed for nemt at manøvrere rundt.

En hjørneløsning hvilke giver én dermed gør det lettere at nå va

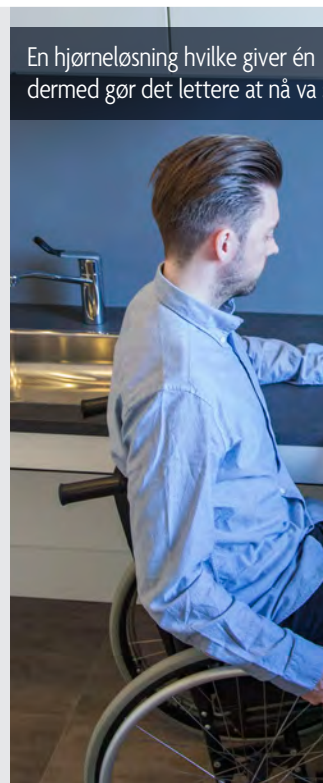





højde i køkkenet og sk og kogesektion



ROPOX

## FlexiElectric/FlexiManual

- Ideelt i private boliger, skoler, træningskøkkener, beskyttede boliger/ældreboliger og plejecentre, m.v.
- Alle slags køkkenbordplader kan monteres på stellet i længderne 60 - 300 cm.
- Vask og kogeplade kan monteres i bordplade.
- Justeres let op og ned manuelt eller elektrisk.
- Vi anbefaler altid sikkerhedsstop til de elektriske systemer for øget sikkerhed og undgå, at personer eller ting kommer i klemme.



ROPOX

## FlexiBasic

- Er en god og økonomisk løsning til køkkener i plejecentre og handicapboliger.
- Velegnet til projekter med flere køkkener.
- Kan justere bordplader på op til 300 cm længde, evt. med vask og kogeplader.
- Til lejlighedsvis justering af bordhøjden.
- Kan efterfølgende opgraderes til FlexiManual eller FlexiElectric, hvis der er behov for det.
- Justeres i højden ved hjælp af Ropox løfteenhed.



ROPOX

## Bordpladebæringer

- Ideel til boliger eller plejecentre.
- Trinløs justering.
- Til projekter, hvor der sjældent er behov for justering.



To separate bordplader hvilke giver mulighed for to arbejds højder i køkkenet



Ropox dækkappeløsning til bordben og vandinstallation



# Ropox overskabsløsninger

## OVERSKABENE KOMMER TIL DIG

Uanset hvilken af vores løsninger du vælger, er målet, at du kan nå alt i dine overskabe, siddende eller stående. Overskabene kommer ned i den højde, der passer til dig, så du ubesværet kan nå alt i dine skabe. Du kører skabet ned og op ved tryk på én knap. Igen er det dit behov og din situation, der afgør, hvilken løsning du skal vælge. Tag os med på råd!

Sikkerhedsstopplade med int

Betjening for justering af over







egret spot

skabe



ROPOX

## VertilInside (Vertikalt ned/op)

- Løsningen monteres inde i skabet.
- Ændrer ikke på køkkenets udseende.
- Kan sænkes med 49,5 cm.
- Let og enkel løsning.
- Kan belastes med helt op til 80 kg.
- Hylde kører ned/op.
- Der er mulighed for at installere lys i den nederste sikkerhedsstopplade.
- Integreret sikkerhedsstopplade i toppen og bunden af skabet.



ROPOX

## VertiElectric (Vertikalt ned/op)

- Hele skabet kører ned/op.
- Skabet kan sænkes med 30 cm.
- Systemet er usynligt efter montering af skab.
- Dybden på rammen er kun 5 cm.
- Rammen fås i to modeller passende til skabsbredder 40-180 cm.
- Sikkerhedsstopplade kan monteres i bunden, så klemningsfare undgås.
- Der er mulighed for at installere lys i den nederste sikkerhedsstopplade.
- Kan belastes op til 80/120 kg.



ROPOX

## Diagonal (Diagonalt ned/op)

- Skabet justeres i en bevægelse vertikalt (43 cm) og diagonalt (18 cm.)
- Dybden på rammen er kun 11,5 cm.
- Kan belastes op til 120/220 kg.
- Der er mulighed for at installere lys i sikkerhedsstoppladen.
- Rammen fås til skabsbredde fra 40-180 cm.
- Systemet er usynligt efter montering af skab.




ROPOX

## Bæringer til overskabe


- Bæringer gør det muligt at ændre højden på overskabene trinvis.
- De monteres bag på overskabene og er dermed helt skjulte.
- Højdejustering på overskabe, sker i intervaller af 4,2 cm.
- Kan belastes med op til 90 kg.

# RÅD & VEJLEDNING OM INDRETNING...

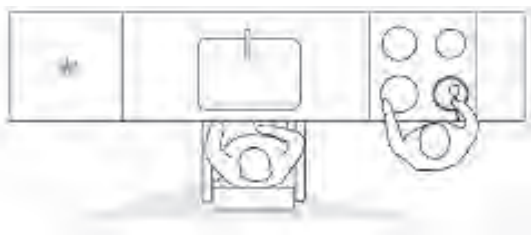


## ÉN-SIDET KØKKEN

- To personer kan arbejde ved siden af hinanden.

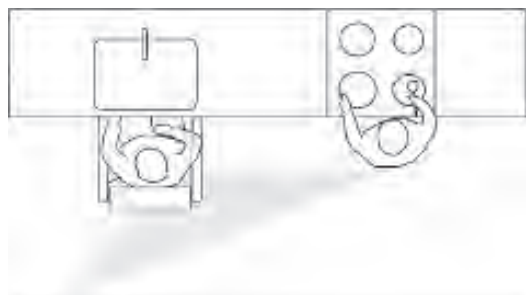


- Gangbesværede kan støtte sig i begge sider.
- To uafhængige arbejdspladser.
- Vask og kogesektion bør være på samme side.

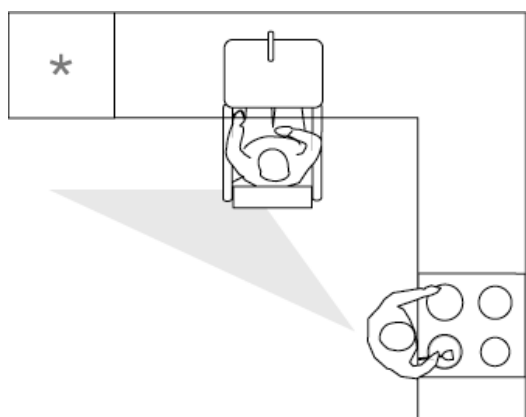

## L-FORMET KØKKEN

- Siddende og stående kan arbejde ved hver sin arbejdsstation.
- Nemt at manøvrere rundt i for en siddende bruger.

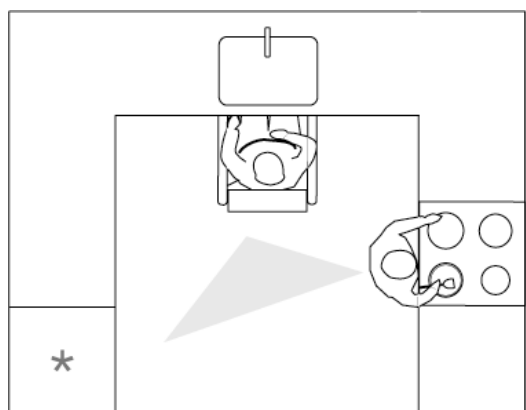

## U-FORMET KØKKEN

- Ting kan blive skubbet rundt på hele bordpladen.
- Nemt at manøvrere rundt for en siddende bruger.




# OPTIMALE RÆKKEHØJDER...

## ROPOX OVERSKABE



Ropox VertiInside

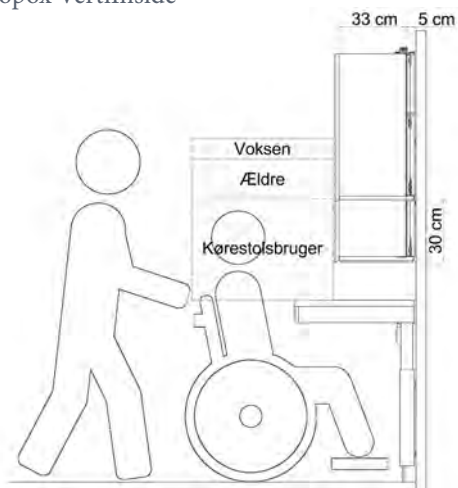


Ropox VertiElectric

## OPTIMALE BORDPLADE HØJDER SOM BRUGER KAN NÅ

Kørestolsbruger: 70-75 cm

Ældre: 85 cm

Voksen: 90-95 cm

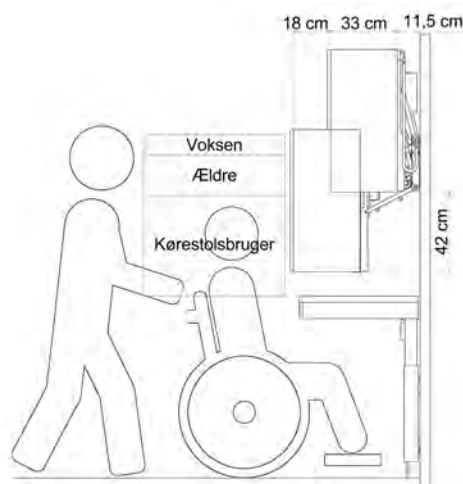

Ropox Diagonal

# SIKKERHED I FOKUS...



Sikkerhedsstopplade anbefales installeret i alle Ropox's overskabs-løsninger for at hindre klemfaren. Desuden kan overskabene forbindes med bordstel via en Ropox Smartbox, for at undgå klemningsfaren mellem overskabe og bordplade.



Ved flere justerbare bordplader ved siden af hinanden, kan en Ropox Smartbox benyttes for at reducere klemfaren mellem bordpladerne.



Ropox klemklister aktiveres i det øjeblik de møder modstand og bordpladerne kører automatisk lidt op igen, så det der måtte være i klemme frigives.

# OM ROPOX

## Frihed til trygt at klare sig selv

Mennesker med nedsat funktionsevne skal have en lettere hverdag med højere livskvalitet, øget selvværd og frihed til trygt at klare sig selv. Sådan har målsætningen lydt siden Ropox' grundlæggelse i 1962.

Vi er blandt verdens førende specialister inden for produktion af hjælpemidler og møbler til handicappede samt udstyr til ergo- og fysioterapeutisk genoptræning. Vores produkter er anerkendt og værdsat over hele verden for høj kvalitet, fleksibilitet og brugervenlighed.

Ropox beskæftiger i dag over 60 medarbejdere og er repræsenteret i fire verdensdele.

Ropox har igennem mere end 50 år udviklet et bredt sortiment af produkter, til personer med nedsat funktionsevne, og besidder derfor en unik viden om emner, der vedrører tilgængelighed og arbejdsmiljø.

For yderligere informationer, kontakt venligst Ropox eller en af vores forhandlere – [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)



Copyrights © All Rights Reserved Ropox A/S 2015

### ROPOX BORDE

SMUKKE  
HØJDEJUSTERBARE  
BORDE TILPASSET  
INDIVIDUELLE  
BEHOV

### ROPOX KØKKENER

FLEKSIBLE OG  
HØJDEINDSTILLELIGE  
KØKKENLØSNINGER

### ROPOX BADERUM

INNOVATIVE  
OG SPÆNDENDE  
PRODUKTER  
I EN SMUK  
SAMHØRIGHED

### ROPOX PUSLEBORDE

SIKRE OG FLEKSIBLE  
LØSNINGER I EN  
ERGONOMISK  
UDFORMNING

ROPOX A/S · RINGSTEDGADE 221 · 4700 NÆSTVED, DANMARK  
TLF.: +45 5575 0500 · [INFO@ROPOX.DK](mailto:INFO@ROPOX.DK) · [WWW.ROPOX.DK](http://WWW.ROPOX.DK)

**ROPOX**  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS