

”Et fastmonteret skifte/bruseleje med høj komfort”



## ROPOX SKIFTE/BRUSELEJE

### BEHAGELIGT, NEMT OG SIKKERT AT BRUGE

Skifte/bruselejet giver brugeren den bedste komfort og sikkerhed, og hjælperen får den mest optimale arbejdsstilling. Det giver tryghed og tilfredshed for begge parter.

Liggefladen er opdelt i lameller, som kan vendes. Den ene side er svagt nedadbuget, og det gør, at brugeren ligger sikkert og yderst velegnet til badesituationer, hvor vandet kan løbe ned i karret. Den anden side er svagt opadbuget, og det gør det nemt at hjælpe brugeren om på siden, når man bruger lejet til omklædning.

Man kan justere lejet i højden med håndbetjeningen, og derfor kan det hurtigt tilpasses en kørestol eller lignende, så man kan forflytte en bruger til og fra lejet uden hindringer.

Både lameller og opsamlingskarret er helstøbt og let at rengøre, og når lejet ikke bruges, kan det klappes op ad væggen, så det ikke optager plads i baderummet.




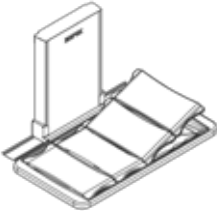
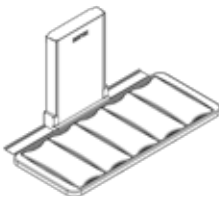
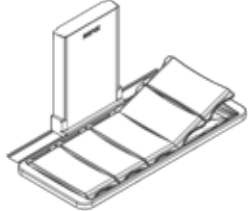
**ROPOX**<sup>TM</sup>  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS

- A PART OF AddLife



# ROPOX BRUSELEJE


Højdejustering: 70 cm (30-100 cm)  
Max. belastning: Iht. DS/ISO 17966:2016 er  
max. brugervægt 220 kg

## ROPOX SKIFTE/BRUSELEJE

SKIFT/BRUSELEJE - 146 CM		SKIFT/BRUSELEJE - 178 CM	
			
uden rygstøtte V-nr.: 40-25023	Med rygstøtte V-nr.: 40-25073	uden rygstøtte V-nr.: 40-25026	Med rygstøtte V-nr.: 40-25076

SKIFT/BRUSELEJE - 210 CM	
	
uden rygstøtte V-nr.: 40-25029	Med rygstøtte V-nr.: 40-25079

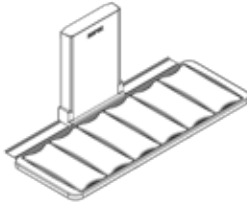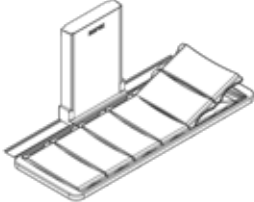

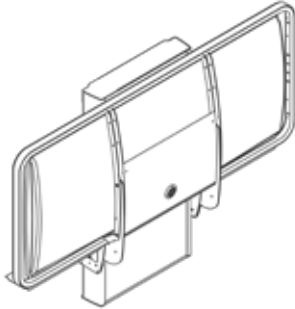- \* Lejet kan klappes op, så det ikke optager unødigt plads i rummet.
- \* Lejet højdejusteres nemt med elektrisk håndbetjening.
- \* Liggefladen er 18 cm kortere end lejets længde.



## TILBEHØR

Rygstøtte  
V-nr.: 40-25031

Endegavl  
V-nr.: 40-25038

Sengehest  
V-nr.: 40-25036

Nakkestøtte  
V-nr.: 40-25090

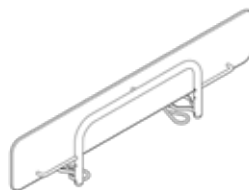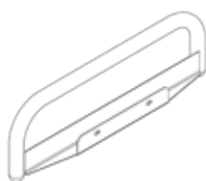

**OBS!** Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark · Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

**ROPOX**<sup>TM</sup>  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS  
- A PART OF AdLife

No. 1962300-0221