

”Giver uafhængigheden
på badeværelset”

ROPOX TOILETLØFTER

GØR DET LETTERE AT BRUGE TOILETTET UDEN HJÆLP

ROPOX Toiletløfter er en hjælp til at sætte sig og rejse sig fra toilettet. Det er en lille enhed med stor kapacitet og et diskret design, der nemt kan tilpasses individuelle behov.

Den findes i en manuel og en elektrisk version, der har et højdejusteringsinterval på henholdsvis 22 cm og 25 cm. Den elektriske model betjenes med en trådløs håndbetjening. På den manuelle model justeres højden ved hjælp af et håndsving, der kan demonteres, hvis man ønsker.

Man kan tilvælge specialdesignede, højdejusterbare Toiletstøtter, som monteres på siden af unit'en. Det sikrer god plads og adgangsforhold ved forflytninger. De kan monteres eller fjernes enkeltvis, hvis en brugers behov kræver det.

Den bløde overflade med afrundede hjørner gør Toiletløfteren nem at rengøre. Det betyder, at det bliver lettere at opretholde et højt hygiejneniveau.





ROPOX TOILETLØFTER

Højdejustering: Electric 25 cm (fra 40-65 cm)
Manual 22 cm (fra 40-62 cm)

Max. belastning: Iht. DS / ISO 17966:2016 er max. brugervægt 400 kg

VARIANT/MODEL

TOILETLØFTER	
	
Electric V-nr.: 40-45027	Manual V-nr.: 40-45026


Toiletløfter unit i bundposition: Model Electric/ Manual 115,4x 52,3 x 20,5 cm.

Geberit top cisterne komponenter.

Dobbelt skyllesystem som kan justeres til "grøn byggeri krav" på 2 og 4,5 liter skyl.

TILBEHØR


Højdejusterbare
toiletstøtter, Wave
V-nr: 40-45013 (66 cm)
V-nr: 40-45014 (88 cm)

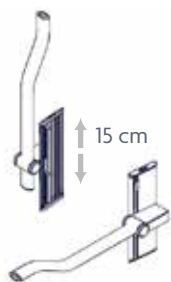

Toiletrulleholder
V-nr.: 40-40910



Højdejusterbare
toiletstøtter, Straight
V-nr: 40-45011 (66 cm)
V-nr: 40-45012 (88 cm)

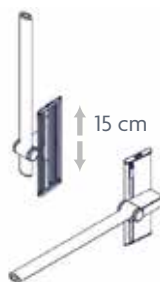


Rejse/sætte beslag
V-nr.: 40-40925



Væghængt toilet, Kort model
Ekstra smudsafvisende
overflade
V-nr: 40-44070
(dybde 56 cm)



Lang rygstøtte
V-nr.: 40-45100

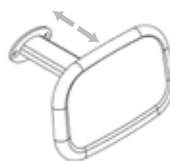

Væghængt toilet, Lang model
Ekstra smudsafvisende
overflade
V-nr: 40-44071
(dybde 70 cm)



Kort rygstøtte
V-nr: 40-45101



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS / ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark · Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF AddLife

No. 1962297-0221