

# ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

- A PART OF AddLife



## ALL IN ONE PERSONLØFTER/STÅLIFT

For komfort og sikkerhed

## TEKNISKE DATA, PERSONLØFTER

		* Se side 4
Løftekapacitet	150 kg	* 200 kg
Bom/åg højeste position	180 cm	177 cm
Bom/åg laveste position	55 cm	58 cm
Understel, længde	117 cm	122 cm
Understel, højde	12 cm	12 cm
Bredde ved lukkede ben	65 cm	69 cm
Bredde ved åbne ben	109 cm	133 cm
Hjuldiameter, forreste hjul	7,5 cm	7,5 cm
Hjuldiameter, bagerste hjul	10 cm	10 cm
Vægt batteriboks	3 kg	3 kg
Totalvægt	51 kg	54,3 kg
Antal lift pr. opladning, ca.	60	30



Opladning af liften er enkel og sikker. Ladestikket sættes blot i stikkontakten. Laderen er indbygget i kontrolboksen.



Den nye "All-in-One" Aktiv Lift kan ændres fra en standard personløfter til en stålift - uden brug af værktøj. Med to funktioner i ét og samme hjælpemiddel, opnås en fleksibilitet, der giver umiddelbare økonomiske besparelser og effektivisering af arbejdsrutinerne.



Med "All-in-One" liften kan brugeren løftes fra gulv.




Personløfteren er enkel at betjene og har et stort løfteområde - 120 cm.



Det specielle Domino Hygiejne sejl giver god adgang til brugeren - støtter godt, og er meget enkelt at benytte.

- a "All-in-One" liften har en meget lille venderadius, idet understellet kun er 117 cm langt inkl. hjul.
- a "All-in-One" liften er lille og praktisk - men kombinerer alligevel styrke med enkelhed i brug.
- a Liften er sikker at benytte, bl.a. vil løftearmen automatisk stoppe, såfremt den møder modstand under sænkning.
- a Bemærk, at understellet kun er 12 cm højt, hvilket betyder, at liften let kan køres ind under alle sengetyper.

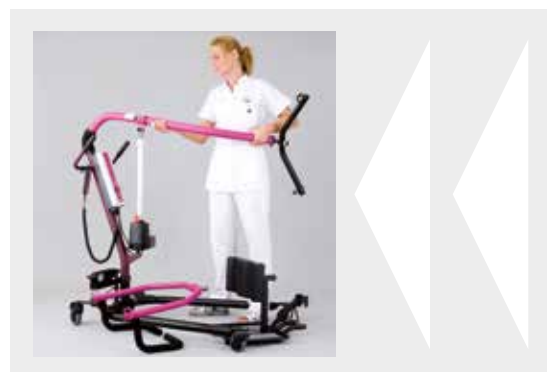

## TEKNISKE DATA, STÅLIFT

		* Se side 4
Løftekapacitet	150 kg	* 200 kg
'Gaffelarm' højeste position	191 cm	191 cm
'Gaffelarm' laveste position	95 cm	95 cm
Understel, længde	117 cm	122 cm
Understel, højde	12 cm	12 cm
Bredde ved lukkede ben	65 cm	69 cm
Bredde ved åbne ben	109 cm	133 cm
Hjuldiameter, forreste hjul	7,5 cm	7,5 cm
Hjuldiameter, bagerste hjul	10 cm	10 cm
Vægt batteriboks	3 kg	3 kg
Vægt af fod og knæstøtte	8,5 kg	8,5 kg
Totalvægt	58,5 kg	61,5 kg
Antal lift pr. opladning, ca.	60	30



Når personløfteren er ændret til en stålift, er der tale om en aktiv lift. Brugeren bliver nu en aktiv del i hele løfteprocessen og forflyttes på en værdig måde. Såvel bruger som plejepersonale oplever væsentlige fordele ved brug af stålift.

Samtidig opnås ubesværet løft og sænkning af brugeren. Forflytning mellem f.eks. kørestol, seng, toilet, bad etc. sker let og komfortabelt. Plejepersonale undgår rygskader. Se nedenfor, hvor let en person eksempelvis kan forflyttes fra en kørestol til et toilet.



Bemærk: Knæstøtten er anatomisk udformet - og justeres både i højden og ud/ind mod brugeren. Dvs. man opnår altid en korrekt indstilling af knæstøtten.



Løftet er behageligt for personen. Man oplever ikke et pres eller tryk under armene.



Personen kan stille og roligt nedsænkes på toilettet.

Hvis personløfteren ønskes ændret til en "stålift" - tages den yderste del af løftearmen af, og "gaffelarmen" + fod og knæstøtte påsættes - helt uden brug af værktøj. For nemheds skyld bør liften bremses ved omskiftningen.



Liften har både elektrisk og manuelt nødfir.



Batteriet kan nemt og enkelt udskiftes.





# BESTILLINGSINFORMATION

VARE NR. BESKRIVELSE

VARE NR.	BESKRIVELSE
	<b>KOMBINATIONSLIFT ALL-IN-ONE 150 KG</b>
25-20020	All-in-One kombineret person-/stålift. Kan ændres fra personlift til stålift og vice versa. Inkl. batteri og indbygget oplader.
	<b>PERSONLIFT 150 KG</b>
25-20040	Personlift, standard inkl. batteri og indbygget lader.
25-20010	Personlift, standard inkl. batteri og indbygget lader. Kan ændres til stålift ved tiløb af 25-20120
	<b>STÅLIFT 150 KG</b>
25-20050	Stålift, standard inkl. batteri og indbygget lader.
25-20030	Stålift, standard inkl. batteri og indbygget lader. Kan ændres til personlift ved tiløb af 25-20455
	<b>KOMBINATIONSLIFT ALL-IN-ONE 200 KG</b>
25-20520	All-in-One kombineret person-/stålift. Kan ændres fra personlift til stålift og vice versa. Inkl. batteri og indbygget oplader.
	<b>PERSONLIFT 200 KG</b>
25-20524	Personlift, standard inkl. batteri og indbygget lader.
25-20521	Personlift, standard inkl. batteri og indbygget lader. Kan ændres til stålift ved tiløb af 25-20517
	<b>STÅLIFT 200 KG</b>
25-20525	Stålift, standard inkl. batteri og indbygget lader.
25-20523	Stålift, standard inkl. batteri og indbygget lader. Kan ændres til personlift ved tiløb af 25-20516
	<b>TILBEHØR</b>
25-20120	Stålift kit, All-in-One 150 kg. Gaffelformet løftearm samt fodplade med højde- og dybde indstillelig fod og knæstøtte.
25-20517	Stålift kit, All-in-One 200 kg. Gaffelformet løftearm samt fodplade med højde- og dybde indstillelig fod og knæstøtte.
25-20455	Personlift kit, All-in-One 150 kg, bestående af løftearm med åg.
25-20516	Personlift kit, All-in-One 200 kg, bestående af løftearm med åg.
25-97260	Polstring til åg.
25-29950	Vægmonteret ladestation inkl. batteri.
25-29030	Batteri.
25-29235	Digital vægt. Kapacitet 300 kg.

Vedrørende sejl - se vores Domino specialbrochure.



## ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

— A PART OF AddLife

Ropox A/S  
Ringstedgade 221  
4700 Næstved  
Telefon 5575 0500  
Telefax 5575 0550  
info@ropox.dk  
www.ropox.dk