

”Et fastmonteret skifte/bruseleje med høj komfort”



ROPOX SKIFTE/BRUSELEJE

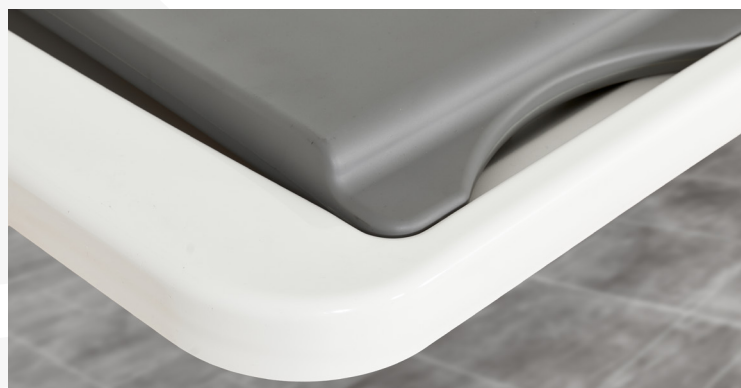
BEHAGELIGT, NEMT OG SIKKERT AT BRUGE

Skifte/bruselejet giver brugeren den bedste komfort og sikkerhed, og hjælperen får den mest optimale arbejdsstilling. Det giver tryghed og tilfredshed for begge parter.

Liggefladen er opdelt i lameller, som kan vendes. Den ene side er svagt nedadbuget, og det gør, at brugeren ligger sikkert ved badesituationer, hvor vandet kan løbe ned i karret. Den anden side er svagt opadbuget, og det gør det nemt at hjælpe brugeren om på siden, når man bruger lejet til omklædning.

Man kan justere lejet i højden med håndbetjeningen, og derfor kan det hurtigt tilpasses en kørestol eller lignende, så man kan forflytte en bruger til og fra lejet uden hindringer.

Både lameller og opsamlingskarret er helstøbt og let at rengøre, og når lejet ikke bruges, kan det klappes op ad væggen, så det ikke optager plads i baderummet.

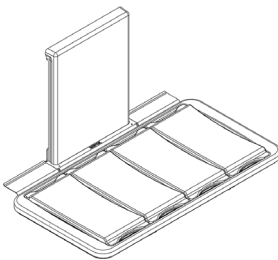
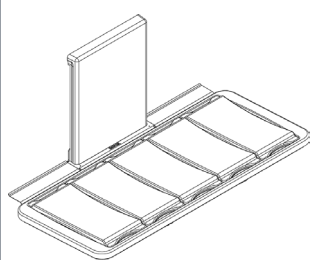
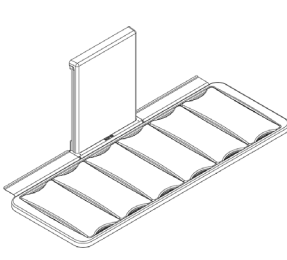


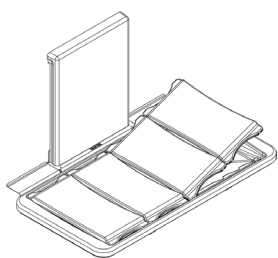
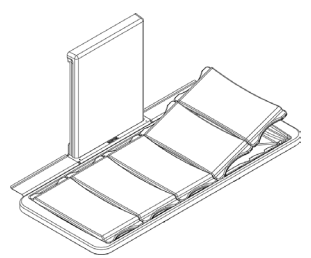
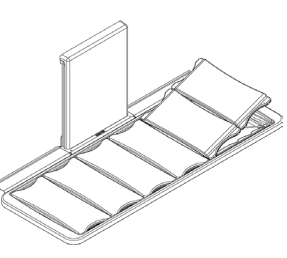
ROPOX SKIFTE/BRUSELEJE

Højdejustering: 70 cm (30-100 cm)

Max. belastning: Iht. DS/ISO 17966: 2016
max. brugervægt 220 kg

VARIANT/MODEL

SKIFT/BRUSELEJE UDEN RYGSTØTTE		
		
146 cm V-nr.: 40-25023	178 cm V-nr.: 40-25026	210 cm V-nr.: 40-25029

SKIFT/BRUSELEJE MED RYGSTØTTE		
		
146 cm V-nr.: 40-25073	178 cm V-nr.: 40-25076	210 cm V-nr.: 40-25079

- Lejet kan klappes op, så det ikke optager unødigt plads i rummet.
- Lejet højdesjusteres nemt med elektrisk håndbetjening.
- Liggefladen er 18 cm kortere end lejets længde.

TILBEHØR

Sengehest:

V-nr.: 40-25034 til skifte/bruseleje 146 cm
V-nr.: 40-25036 til skifte/bruseleje 178 cm
V-nr.: 40-25035 til skifte/bruseleje 210 cm

Endegavl:

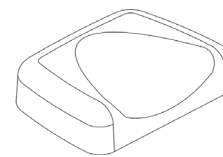
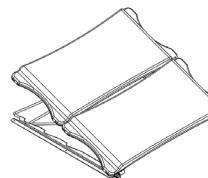
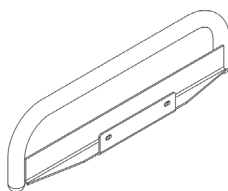
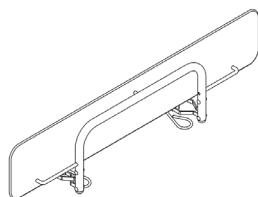
V-nr.: 40-25038

Rygstøtte:

V-nr.: 40-25031

Nakkestøtte:

V-nr.: 40-25090



OBS! Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
– A PART OF AddLife®